


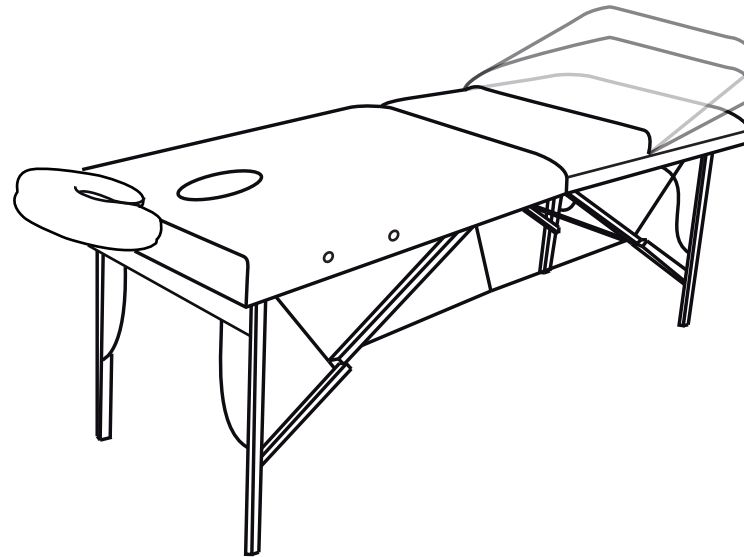


HINWEIS

Nach Erhalt der RUCK-Massageliege ist diese für zwei Tage bei Zimmertemperatur aufgestellt zu lagern.

PRODUKTBESCHREIBUNG

1. Griff für verstellbare Tischbeine
2. Gummifuß
3. Kopfstütze
4. Verschluss
5. Holzstreben
6. Scharnier
7. Tragegriff
8. Verstellbares Rückenteil
9. Einsteckposition für Armauflage
10. Einsteckposition für Kopfteil

ABB. 1

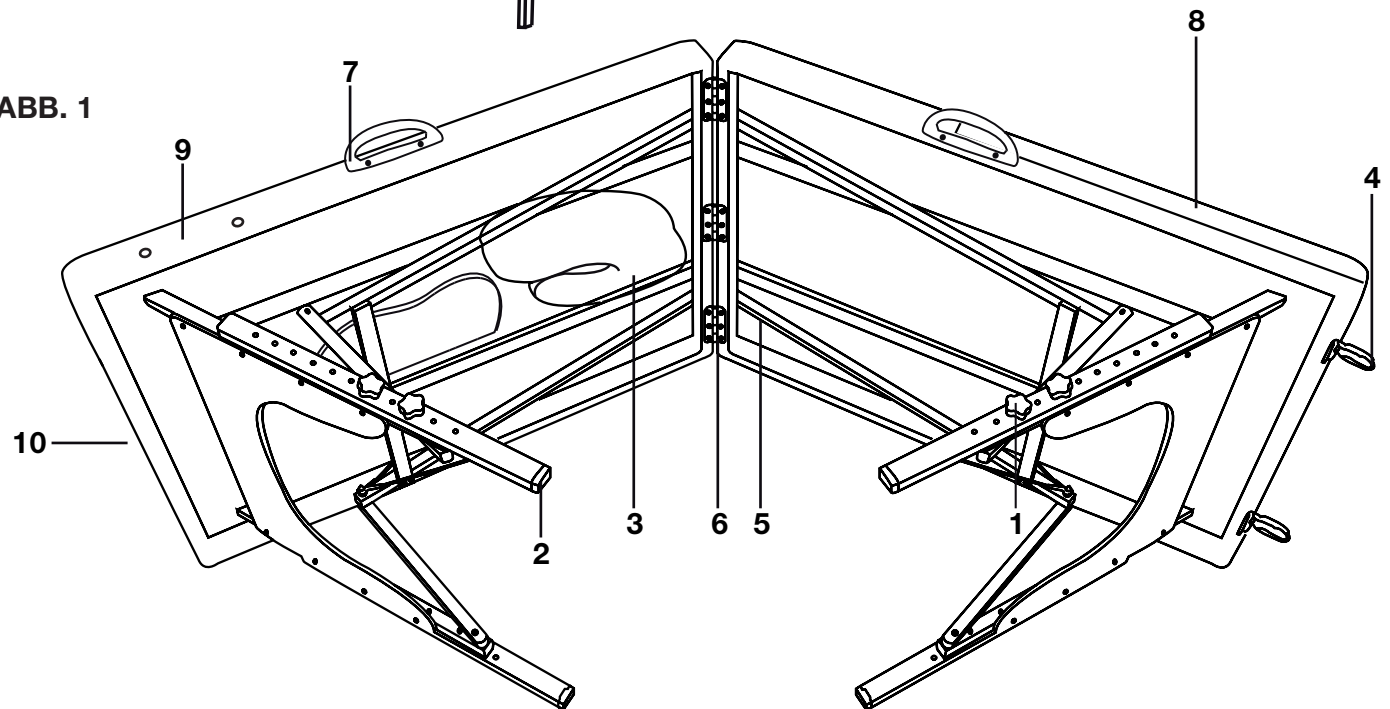



SICHERHEITSHINWEISE

(1) Warten Sie die Liege regelmäßig. Stellen Sie sicher, dass alle Schrauben fest angezogen sind und das Kabel völlig intakt ist. Stellen Sie zudem sicher, dass sich keine Risse oder Sprünge im Holz befinden.

(2) Bitte das angegebene Maximalgewicht nicht überschreiten. Dies kann Verletzungen für Sie und Ihren Kunden zur Folge haben.

(3) Verwenden Sie keine alkoholhaltigen Reinigungsmittel für die Reinigung der Liege; dies kann die weichen Schaumstoffpolsterungen beschädigen. Reinigen Sie die Liegeflächen mit warmem Wasser und mildem Reinigungsmittel. Trocknen Sie die Oberflächen anschließend mit einem fusselfreien Tuch gründlich ab.

(4) Stellen Sie vor der Nutzung sicher, dass alle vier Füße fest auf dem Boden stehen. Benutzen Sie die Liege nur auf einer ebenen Fläche.

AUFBAUANLEITUNG

Legen Sie die Liege auf die Seite und lösen Sie die Verschlüsse. Klappen Sie die Liege ein wenig auf und entfernen Sie das Zubehör.

Stellen Sie sich hinter die Liege und fassen Sie beide Haltegriffe. Mit einer Bewegung nach vorne lassen sich die Beine der Liege leicht ganz öffnen.

Nehmen Sie den mittleren Teil der Liege und stellen Sie die Liege aufrecht auf den Boden. Drücken Sie anschließend von oben auf die Liege und stellen Sie sicher, dass diese komplett flach ist. Sollte die Liege in der Mitte leicht nach oben zeigen, überprüfen Sie die

Kabel an der Unterseite und lockern Sie diese wenn nötig.

NUTZUNG VON LIEGE UND ZUBEHÖR

Der Lieferumfang der Liege enthält zusätzliches Zubehör. Lesen Sie die entsprechenden Anweisungen bitte vor der ersten Nutzung sorgfältig durch.

KOPFSTÜTZE:

Die kreisförmige Kopfstütze ermöglicht eine optimale und komfortable Lagerung für Kopf und Gesicht ihres Kunden. Für die jeweils passende Einstellung können sowohl Höhe als auch Neigungswinkel am Griff eingestellt werden (Abb. 1 | 3).

ARMABLAGE:

Die Armablagen ermöglichen eine komfortable Verbreiterung der Liege zu beiden Seiten. Dies ist besonders bei größeren Kunden hilfreich. Die ebenfalls gepolsterten Armstützen werden einfach auf beiden Seiten der Liege in die dafür vorgesehenen Löcher eingesteckt (Abb. 1 | 9).

HÖHENVERSTELLBARKEIT:

Die optimale Höhe der Liege hängt sowohl von der behandelnden Person als auch von der Art und Ausführungsweise der Behandlung ab. Zur Einstellung der Höhe entfernen Sie die Schrauben an den Beinen, schieben diese je nach Wunsch zusammen oder auseinander und drehen Sie die Schrauben wieder fest (Abb. 1 | 1).

VERSTELLUNG DES RÜCKENPOLSTERS:

Lösen Sie den Verschluss der Rückenstütze. Der Neigungswinkel kann nun ganz einfach eingestellt werden. Drücken Sie anschließend gegen das Polster und stellen Sie sicher, dass dieses eingerastet ist. Um die Liege zusam-

menzuklappen, ziehen Sie das Rückenpolster ganz nach oben und klappen Sie es dann zurück in die komplett plane Position (Abb. 1 | 8).

BELASTBARKEIT:

Positionieren Sie Ihren Kunden in der Mitte der Liege. Das Gewicht kann sich so gleichmäßig verteilen und die Stabilität wird erhöht. Das Nutzgewicht setzt sich zusammen aus dem Gewicht des Kunden und dem bei der Behandlung maximal ausgeübten Druck. Die maximale Belastbarkeit dieser Liege beträgt 200 kg. Da seitlich ausgeübter Druck die Stabilität der Liege mehr beansprucht, sollte die Liegefläche nie einseitig belastet werden.

ÜBERSCHREITEN SIE NIE DIE MAXIMALE BELASTBARKEIT UND DAS MAXIMAL ZULÄSSIGE NUTZGEWICHT DER LIEGE. DIES KANN SCHWERE VERLETZUNGEN ODER SCHÄDEN ZUR FOLGE HABEN!

LAGERUNG:

Befestigen Sie die Kopf- und Armstützen an der Unterseite der Liege. Nutzen Sie die jeweils dafür vorgesehenen Befestigungsmöglichkeiten (Abb. 1 | 10).

Die Tragetasche kann sowohl für die Lagerung als auch für den Transport genutzt werden. So ist die Liege optimal geschützt. Lagern Sie die Liege an einem kühlen, trockenen Platz. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung, extreme Temperaturen (Kälte und Wärme) sowie Feuchtigkeit.

PFLEGEHINWEISE

POLSTERPFLEGE

Tägliche Reinigung: Entfernen Sie tägliche Verschmutzungen mit warmem Wasser und mildem Reinigungsmittel. Trocknen Sie die Oberflächen anschließend mit einem fusselfreien Tuch gründlich ab.

Desinfektion: Desinfizieren Sie die Liege mit einem Desinfektionsmittel mit max. 50 % Alkoholanteil (geeignet für die Verwendung auf Polyurethan-Vinyl).

Fleckentfernung: Kleinere Flecken können mit einem milden Reinigungsmittel entfernt werden. Geben Sie dazu das Reinigungsmittel auf ein feuchtes Tuch und entfernen Sie die Flecken vorsichtig. Wischen Sie mit reinem Wasser nach und trocknen Sie die Stellen anschließend mit einem fusselfreien Tuch. Hartnäckige Flecken müssen eventuell professionell gereinigt werden.

Beachten Sie: Benutzen Sie niemals aggressive, chemische Reinigungs- oder Scheuermittel. Dies kann die Polsterung schwer beschädigen. Vermeiden Sie auch jegliche Pflegemittel da dies ebenfalls Beschädigungen nach sich ziehen kann.

Holzpflge: Ihre Massageliege besteht aus ausgesuchten Harthölzern und ist mit einer Lackierung versehen die keine spezielle Pflege benötigt. Wenn gewünscht, können Sie das Holz mit einem gewöhnlichen Holzpflgeprodukt polieren. Lagern Sie die Liege trocken und vermeiden Sie nasse oder feuchte Umgebungen. Sollte die Liege dennoch nass werden, trocknen Sie sie