nova SE



work with ea SE

Οδηγίες χρήσης

EL | Ελληνικά

5800101

8016501 | Οδηγίες χρήσης για τη συσκευή περιποίησης ποδιών nova SE
Αναθ. 01 | Ημερομηνία αναθεώρησης: 11/02/2025

Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας

Αξιότιμη πελάτισσα, αξιότιμε πελάτη,

Με τη nova SE αποκτήσατε μια συσκευή περιποίησης ποδιών, η οποία θέτει νέα πρότυπα όσον αφορά τη λειτουργικότητα και την απόδοση. Αναπτύχθηκε με συνέπεια «από την πράξη – για την πράξη». Μπορείτε να αντιληφθείτε πάνω από 90 χρόνια τεχνογνωσίας και γνώσης στην περιποίηση ποδιών ακόμη και σε επιμέρους λεπτομέρειες αυτής της νέας λύσης.

Οι παρούσες οδηγίες χρήσης αποτελούν μια βασική εισαγωγή στις λειτουργίες και τη χρήση της συσκευής. Σας βοηθούν επίσης να χρησιμοποιείτε τη συσκευή με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και με ασφάλεια και να αποφεύγετε τα λάθη χειρισμού. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά και φυλάξτε τις κοντά στη συσκευή.

Με την επωνυμία μας και παρέχοντας εγγύηση δύο ετών διασφαλίζουμε ότι θα χαρείτε τη συσκευή σας για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε και σας ευχόμαστε καλή απόλαυση κατά την καθημερινή σας εργασία.

Η HELLMUT RUCK GmbH σας




HELLMUT RUCK GmbH | Daimlerstr. 23 | DE – 75305 Neuenbürg
hellmut-ruck.de

Πνευματικά δικαιώματα

© 2024 HELLMUT RUCK GmbH. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή, η επεξεργασία, η αναπαραγωγή ή η μετάφραση του παρόντος εγγράφου χωρίς την προηγούμενη ρητή έγγραφη συγκατάθεση της HELLMUT RUCK GmbH.


Οι παρούσες οδηγίες χρήσης είναι διαθέσιμες και σε άλλες γλώσσες. Μπορείτε να βρείτε τις γλωσσικές παραλλαγές στον ιστότοπό μας:

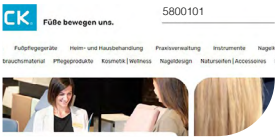

hellmut-ruck.de




ch.hellmut-ruck.de

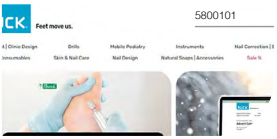


hellmut-ruck.uk

Όρος αναζήτησης: **5800101**

Ανοίξτε **Gebrauchsanweisungen** | **Manuals** (Οδηγίες χρήσης) στην ενότητα **Downloads**.

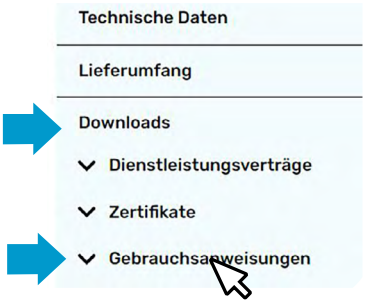

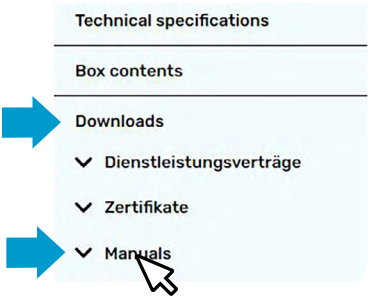

Πίνακας περιεχομένων

1 Μετάβαση στις παρούσες οδηγίες χρήσης 8
1.1 Χρησιμοποιούμενα σύμβολα 8
1.2 Σημασία των προειδοποιητικών λέξεων 10
1.3 Δήλωση για τις παρούσες οδηγίες χρήσης 10
1.4 Ομάδα-στόχος των οδηγιών χρήσης 11
1.5 Απαιτήσεις και προσόντα του προσωπικού χειρισμού 11

2 Περιγραφή προϊόντος 12
2.1 Κύρια εξαρτήματα 12
2.1.1 Πινακίδα τύπου στο κάλυμμα της σακούλας φίλτρου σκόνης 13
2.2 Περιγραφή λειτουργίας 14
2.3 Κατάλληλες συνθήκες λειτουργίας 14
2.4 Προβλεπόμενη χρήση 15

3 Βασικές υποδείξεις ασφαλείας 16
3.1 Κίνδυνοι λόγω ηλεκτρισμού 16
3.2 Κίνδυνοι λόγω βλάβης της συσκευής 16
3.3 Κίνδυνοι λόγω μη εγκεκριμένης συντήρησης ή μη εγκεκριμένων μετατροπών 17
3.4 Κίνδυνοι λόγω μη εξουσιοδοτημένης λειτουργίας 17
3.5 Κίνδυνοι λόγω ακατάλληλης θέσης εγκατάστασης 18
3.6 Κίνδυνοι από δυνητικά παθογόνα σωματίδια 18
3.7 Κίνδυνοι λόγω ακατάλληλων ή ελαττωματικών εργαλείων 19
3.8 Κίνδυνοι λόγω λανθασμένων ρυθμίσεων ή λανθασμένης χρήσης 19
3.9 Κίνδυνοι λόγω κινούμενων εξαρτημάτων 20
3.10 Κίνδυνοι λόγω νερού και υγρασίας 20
3.11 Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα 21
3.12 Κίνδυνοι λόγω ανεπαρκούς απολύμανσης 21

4 Περιεχόμενο συσκευασίας και συναρμολόγηση 22
4.1 Περιεχόμενο συσκευασίας 22
4.2 Παράδοση 22
4.3 Συνθήκες αποθήκευσης 23
4.4 Συναρμολόγηση συσκευής 23

5 Χειρισμός και λειτουργία 26
5.1 Εγκατάσταση 26
5.2 Σύνδεση και ενεργοποίηση 26
5.3 Οθόνη με λειτουργία αφής 27
5.4 Κύριες προβολές της οθόνης 27
5.5 Βασική προβολή 28
5.5.1 Ρύθμιση ταχύτητας περιστροφής 29
5.5.2 Ρύθμιση φοράς περιστροφής 29
5.5.3 Ρύθμιση ισχύος αναρρόφησης 30
5.5.4 Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του μοτέρ χειρολαβής 31
5.6 Προβολή αγαπημένων 32
5.6.1 Δημιουργία αγαπημένων 33
5.6.2 Επεξεργασία ή διαγραφή ενός αγαπημένου 34
5.7 Λειτουργία αναμονής 34
5.8 Στοιχεία πλοήγησης 35
5.9 Λειτουργίες του μενού «Ρυθμίσεις» 36
5.10 Λειτουργίες του μενού «Ρυθμίσεις συσκευής» 38
5.11 Λειτουργίες στο μενού «Βοήθεια» 40
5.12 Εργαλεία 41
5.12.1 Χρησιμοποιήσιμα εργαλεία 41
5.12.2 Τοποθέτηση εργαλείου στη χειρολαβή 43
5.12.3 Αντικατάσταση εργαλείου 43

Πίνακας περιεχομένων

5.13 Εργονομικό κράτημα της χειρολαβής 44

5.13.1 Κράτημα χειρολαβής σαν πένα 44

5.13.2 Κράτημα χειρολαβής από επάνω 44

5.14 Αντικατάσταση σακούλας φίλτρου σκόνης 45

5.14.1 Αντικατάσταση της σακούλας φίλτρου σκόνης με ενεργοποιημένη τη συσκευή 45

5.14.2 Αφαίρεση γεμάτης σακούλας φίλτρου σκόνης 46

5.14.3 Τοποθέτηση νέας σακούλας φίλτρου σκόνης 47

5.15 Αντικατάσταση φίλτρου HEPA 48

5.15.1 Αντικατάσταση του φίλτρου HEPA με ενεργοποιημένη τη συσκευή 49

5.15.2 Αλλαγή του φίλτρου HEPA όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη ή σε κατάσταση αναμονής 49

5.15.3 Αφαίρεση ολόκληρου του φίλτρου HEPA 50

5.15.4 Τοποθέτηση νέου φίλτρου HEPA 51

5.16 Ακεραιότητα της κύριας μονάδας 52

5.17 Απενεργοποίηση 52

6 Συντήρηση και εγγύηση 53

6.1 Τακτική συντήρηση από το τμήμα τεχνικής εξυπηρέτησης της RUCK 53

6.1.1 Πύλη επιστροφών και τεχνικής εξυπηρέτησης 53

6.2 Τακτική συντήρηση από το προσωπικό χειρισμού 54

6.2.1 Επισκόπηση 54

6.1.2 Καθαρισμός και απολύμανση 54

6.2.2 Κατάλληλα προϊόντα καθαρισμού και απολύμανσης 55

6.2.3 Καθαρισμός και απολύμανση της υποδοχής εργαλείου, του μοτέρ χειρολαβής και του εσωτερικού του περιβλήματος χειρολαβής 56

6.3 Αντικατάσταση της ανταλλάξιμης κεφαλής σύσφιξης της χειρολαβής 57
6.4 Καθαρισμός εύκαμπτου σωλήνα αναρρόφησης Flex και καλωδίου μοτέρ..... 58
6.4.1 Αφαίρεση εύκαμπτου σωλήνα αναρρόφησης και καλωδίου μοτέρ..... 58
6.4.2 Καθαρισμός και στέγνωμα 60
6.4.3 Συναρμολόγηση..... 61
6.5 Αντικατάσταση του συνδέσμου για την ανταλλάξιμη κεφαλή σύσφιξης 62
6.6 Αντικατάσταση μοτέρ χειρολαβής 64
6.7 Καθαρισμός του δακτυλίου έδρασης του συνδέσμου για την ανταλλάξιμη κεφαλή σύσφιξης..... 64
6.8 Εγγύηση..... 65
6.9 Φίλτρα και ανταλλακτικά 66
6.9.1 Φίλτρα..... 66
6.9.2 Ανταλλακτικά 66

7 Παρελκόμενα 69

8 Απόρριψη..... 71
8.1 Εκτιμώμενη ωφέλιμη ζωή 71
8.2 Απόρριψη των φίλτρων 71
8.3 Απόρριψη της συσκευής μετά την πάροδο της περιόδου χρήσης..... 71

9 Μηνύματα..... 72
9.1 Επισκόπηση μηνυμάτων..... 73

10 Τεχνικά στοιχεία..... 78

1 Μετάβαση στις παρούσες οδηγίες χρήσης

1.1 Χρησιμοποιούμενα σύμβολα

Τα σύμβολα αυτά χρησιμοποιούνται στις οδηγίες χρήσης, στη συσκευασία του προϊόντος ή πάνω στο ίδιο το προϊόν:



Κίνδυνος για άτομα. Λάβετε υπόψη τις υποδείξεις που επισημαίνονται με αυτόν τον τρόπο για να αποφύγετε τραυματισμούς.



Θέτει σε κίνδυνο την κατάσταση ή τη λειτουργικότητα του προϊόντος ή θέτει σε κίνδυνο το περιβάλλον.



Σήμα συμμόρφωσης CE.




Συσκευή κατηγορίας προστασίας II (με προστατευτική μόνωση).
Δεν απαιτείται γείωση, καθώς η προστασία παρέχεται από τη διπλή μόνωση.

IP21


Προστασία έναντι επαφής με το δάχτυλο και έναντι ξένων σωμάτων με διάμετρο μεγαλύτερη από 12,5 mm.
Προστασία από νερό: Προστασία από κατακόρυφες σταγόνες νερό.



Προστασία από νερό και υγρασία.

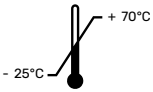

Κατώτερα και ανώτερα όρια θερμοκρασίας για αποθήκευση και μεταφορά

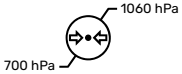

Κατώτερα και ανώτερα όρια ατμοσφαιρικής πίεσης για αποθήκευση και μεταφορά



Κατώτερα και ανώτερα όρια υγρασίας για αποθήκευση και μεταφορά



Τηρείτε τις οδηγίες χρήσης.



Δώστε προσοχή στην υπόδειξη για την απόρριψη.



Κατασκευαστής



Ημερομηνία κατασκευής



Αριθμός προϊόντος



Σειριακός αριθμός συσκευής

1.2 Σημασία των προειδοποιητικών λέξεων

Στο παρόν έγγραφο χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες προειδοποιητικές λέξεις:



ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Υπόδειξη πολύ πιθανού ή άμεσου κινδύνου. Εάν δεν αποφευχθεί ο κίνδυνος, μπορεί να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός ή θάνατος.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Υπόδειξη πιθανού κινδύνου. Εάν δεν αποφευχθεί ο κίνδυνος, μπορεί να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός ή θάνατος.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Υπόδειξη ενδεχόμενου κινδύνου. Εάν δεν αποφευχθεί ο κίνδυνος, μπορεί να προκληθούν τραυματισμοί.

1.3 Δήλωση για τις παρούσες οδηγίες χρήσης

Η Hellmut Ruck GmbH διατηρεί όλα τα δικαιώματα να τροποποιεί και να συμπληρώνει τις παρούσες οδηγίες χρήσης. Η Hellmut Ruck GmbH κατέβαλε σημαντικές προσπάθειες, ώστε να απαλλάξει τις οδηγίες χρήσης από τυχόν ανακρίβειες και παραλείψεις. Αν παρατηρήσετε κάποιο λάθος ή κάποια ανακρίβεια, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε. Εντούτοις, η HELLMUT Ruck GmbH δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν λάθη στις παρούσες οδηγίες χρήσης καθώς επίσης για τις επακόλουθες ζημιές, οι οποίες προκύπτουν από τη διάθεση των παρουσών οδηγιών χρήσης ή τη χρησιμοποίησή τους κατά τη χρήση του προϊόντος.

Δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση και η συμπλήρωση των παρουσών οδηγιών χρήσης, εκτός αν αυτό εγκριθεί ρητά από τη Hellmut Ruck GmbH.

1.4 Ομάδα-στόχος των οδηγιών χρήσης

Η ομάδα-στόχος των οδηγιών χρήσης είναι οι αγοραστές, οι υπεύθυνοι λειτουργίας και οι χειριστές της συσκευής περιποίησης ποδιών. Οι οδηγίες χρήσης δεν προορίζονται για τα υπό θεραπεία άτομα.

1.5 Απαιτήσεις και προσόντα του προσωπικού χειρισμού

Απαραίτητα προσόντα του προσωπικού χειρισμού:

Το προσωπικό χειρισμού πρέπει να έχει τις κατάλληλες εξειδικευμένες γνώσεις και να είναι εξουσιοδοτημένο να διενεργεί θεραπείες σε άτομα.

Προοριζόμενοι χρήστες:

› **Ποδοκόμοι**
› **Αισθητικοί**
› **Σχεδιαστές νυχιών**


Οι συσκευές δεν προορίζονται για χρήση από μη επαγγελματίες.

Εύρος ηλικίας χειριστών:

› **Ελάχιστη ηλικία: 18 ετών**
› **Μέγιστη ηλικία: Ημερομηνία αποχώρησης από την επαγγελματική ζωή**

2 Περιγραφή προϊόντος


2.1 Κύρια εξαρτήματα

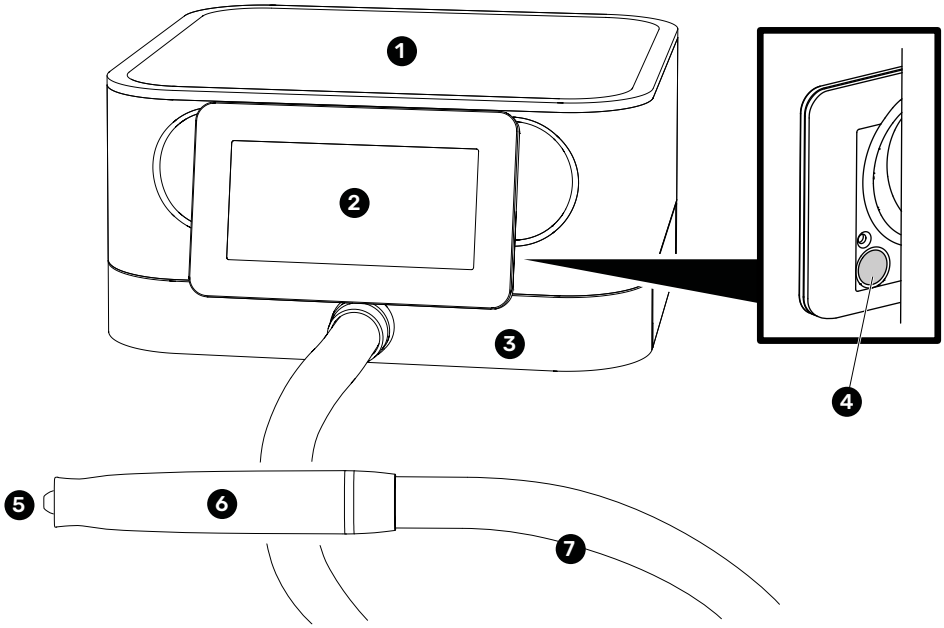

Μπροστινή όψη της συσκευής

1 Κύρια μονάδα με μονάδα ελέγχου και στρόβιλο αναρρόφησης
2 Μονάδα οθόνης
3 Κάλυμμα σακούλας φίλτρου σκόνης
4 Κουμπί για ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της λειτουργίας αναμονής
5 Ανταλλακτική υποδοχή εργαλείου
6 Χειρολαβή
7 Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης Flex

Το συγκρότημα «μονάδα χειρολαβής» αποτελείται από τα εξαρτήματα **3**, **5**, **6** και **7**.

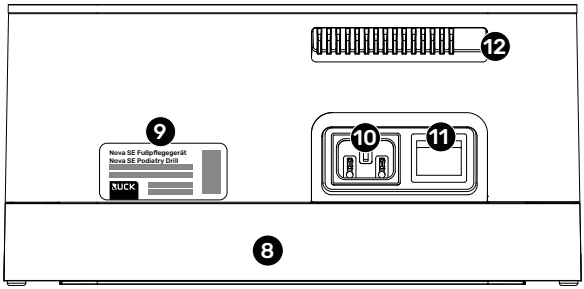

Πίσω όψη της συσκευής

8 Κάλυμμα φίλτρου HEPA


9 Κύρια πινακίδα τύπου

10 Υποδοχή καλωδίου τροφοδοσίας

11 Διακόπτης ισχύος

12 Έξοδος αέρα

2.1.1 Πινακίδα τύπου στο κάλυμμα της σακούλας φίλτρου σκόνης

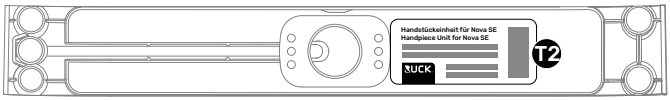

Εσωτερική πλευρά καλύμματος της σακούλας φίλτρου σκόνης

T2 Πινακίδα τύπου της μονάδας χειρολαβής (χειρολαβή με ανταλλακτική υποδοχή εργαλείου, εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης Flex και κάλυμμα σακούλας φίλτρου σκόνης)

2.2 Περιγραφή λειτουργίας

Στρόβιλος αναρρόφησης και χειρολαβή

Ο στρόβιλος αναρρόφησης της κύριας μονάδας συνδέεται με τη χειρολαβή μέσω ενός εύκαμπτου σωλήνα αναρρόφησης Flex. Το μοτέρ στη χειρολαβή περιστρέφει ένα εργαλείο (δεν περιλαμβάνεται στο περιεχόμενο της συσκευασίας), το οποίο ο χειριστής τοποθετεί στην ανταλλακτική υποδοχή εργαλείου της χειρολαβής. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν εργαλεία με διαφορετικά σχήματα, μεγέθη και χαρακτηριστικά (φρέζες, λειαντήρες, στιλβωτήρες).

Λεπτομέρειες σχετικά με τα κατάλληλα εργαλεία: Βλ. ενότητα „5.12 Instrumente“, σελίδα 41.

Σακούλα φίλτρου σκόνης και φίλτρο HEPA

Η σκόνη που δημιουργείται κατά την αφαίρεση του δέρματος και των νυχιών απορροφάται από τη συσκευή και συλλέγεται σε 2 φίλτρα:

Η σακούλα φίλτρου σκόνης στον μπροστινό άξονα φίλτρου αποτελεί το κύριο φίλτρο. Περιέχει ενεργό άνθρακα και συλλέγει σχεδόν όλη την παραγόμενη σκόνη. Η χωρητικότητά του επαρκεί για έως και 150 θεραπείες.

Το πρόσθετο φίλτρο HEPA στον πίσω άξονα φίλτρου συλλέγει τα μικρότερα σωματίδια σκόνης και εξασφαλίζει έτσι τη μέγιστη καθαρότητα του αέρα.

Ξηρή τεχνολογία

Η συσκευή περιποίησης ποδιών λειτουργεί με ξηρή τεχνολογία και είναι κατάλληλη για συνεχή λειτουργία.

2.3 Κατάλληλες συνθήκες λειτουργίας

Θερμοκρασία λειτουργίας: +5 °C έως +40 °C

Ατμοσφαιρική υγρασία: 30 έως 75%, χωρίς συμπύκνωση

Ατμοσφαιρική πίεση: 700 έως 1060 hPa, μέγιστο 3000 μέτρα πάνω από το επίπεδο της θάλασσας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Βεβαιωθείτε ότι η σχετική ατμοσφαιρική υγρασία δεν πέφτει κάτω από το 30%. Εάν το δάπεδο είναι κατασκευασμένο από συνθετικό υλικό και η υγρασία είναι πολύ χαμηλή, οι ηλεκτρομαγνητικές εκκενώσεις ενδέχεται να επηρεάσουν τη λειτουργία της συσκευής.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Βεβαιωθείτε ότι κανένα μέρος της συσκευής δεν ακτινοβολείται από τον ήλιο. Η έκθεση στο ηλιακό φως μπορεί να επηρεάσει την αναγνωσιμότητα της οθόνης και να παρεμποδίσει τη λειτουργία αναρρόφησης και την ψύξη της συσκευής.

2.4 Προβλεπόμενη χρήση

Η συσκευή περιποίησης ποδιών έχει σχεδιαστεί για την αφαίρεση επιφανειακά τροποποιημένων περιοχών του δέρματος και των νυχιών στα πόδια και τη συλλογή τους με ενσωματωμένα φίλτρα. Για τον σκοπό αυτόν, οι περιοχές του δέρματος και των νυχιών πρέπει να είναι επαρκώς στεγνές.

Η συσκευή προορίζεται για χρήση στα ακόλουθα περιβάλλοντα:

- **Κέντρα αισθητικής περιποίησης ποδιών**
- **Κέντρα ευεξίας**
- **Κέντρα περιποίησης νυχιών**
- **Οικιακά περιβάλλοντα**

Οποιαδήποτε άλλη χρήση πέρα από αυτήν που αναφέρεται παραπάνω δεν συνάδει με την προβλεπόμενη χρήση.

Στην προβλεπόμενη χρήση περιλαμβάνεται επίσης η τήρηση όλων των οδηγιών, των υποδείξεων ασφαλείας και των διατάξεων των παρουσών οδηγιών χρήσης.

Σε περίπτωση χρήσης διαφορετικής από την προβλεπόμενη χρήση, η ευθύνη και η εγγύηση παύουν να ισχύουν.

Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- **Σε περίπτωση τραυματισμένου δέρματος**
- **Σε περίπτωση υπερευαισθησίας του δέρματος**
- **Σε περίπτωση δυσανεξίας στα χρησιμοποιούμενα περιστρεφόμενα εργαλεία (τα εργαλεία μπορεί να περιέχουν αλλεργιογόνα υλικά όπως νικέλιο)**

3 Βασικές υποδείξεις ασφαλείας

Οι ακόλουθες υποδείξεις έχουν ως στόχο να διασφαλίσουν την ασφάλεια όλων των ατόμων που διαχειρίζονται, χρησιμοποιούν ή υποβάλλονται σε θεραπεία με τη συσκευή περιποίησης ποδιών.

Λάβετε υπόψη και ακολουθείτε τις οδηγίες για να αποφύγετε τραυματισμούς. Σε περίπτωση που παραβλέψετε τις υποδείξεις και τις προειδοποιήσεις ασφαλείας, φέρετε εσείς την ευθύνη. Ο κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη.

3.1 Κίνδυνοι λόγω ηλεκτρισμού

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Συνδέετε τη συσκευή μόνο σε κατάλληλη παροχή ρεύματος. Λάβετε υπόψη τις πληροφορίες που αναγράφονται στην πινακίδα τύπου. Η λανθασμένη τάση λειτουργίας μπορεί να οδηγήσει σε κινδύνους λόγω ηλεκτρικά υπερφορτωμένων εξαρτημάτων.

Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος πριν καθαρίσετε ή απολυμάνετε τα εσωτερικά μέρη της συσκευής.

3.2 Κίνδυνοι λόγω βλάβης της συσκευής

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο αν δεν έχει υποστεί ζημιά. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα εάν παρατηρήσετε ασυνήθιστη ανάπτυξη θερμότητας, ασυνήθιστη οσμή ή καπνό.

Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν έχει συνθλιβεί, δεν έχει τσακίσει ή δεν τρίβεται πάνω σε άλλα αντικείμενα.

Ελέγχετε καθημερινά το καλώδιο τροφοδοσίας για τυχόν ζημιές. Σε οικιακό περιβάλλον, τα ζώα μπορεί να έχουν προκαλέσει ζημιά στο καλώδιο τροφοδοσίας.

Μην τοποθετείτε πάνω στη συσκευή εξαρτήματα που είναι βαρύτερα από 2 kg.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν έχει υποστεί ισχυρό χτύπημα, π.χ. εάν η συσκευή έχει πέσει στο πάτωμα. Ακόμη και αν δεν είναι ορατή καμία εξωτερική ζημιά, τα ηλεκτρικά εξαρτήματα μπορεί να υποστούν ζημιά. Τότε υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας σε περίπτωση που τα αγγίξετε.

Σε αυτή την περίπτωση, ζητήστε από τον κατασκευαστή ή ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης πελατών να ελέγξει τη συσκευή πριν την ξαναχρησιμοποιήσετε.

3.3 Κίνδυνοι λόγω μη εγκεκριμένης συντήρησης ή μη εγκεκριμένων μετατροπών

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην πραγματοποιείτε μετατροπές, τροποποιήσεις, επισκευές ή συντηρήσεις που δεν περιγράφονται στις παρούσες οδηγίες χρήσης και δεν έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή.

Δεν υπάρχουν εξαρτήματα στο εσωτερικό της κύριας μονάδας που μπορούν να καθαριστούν ή να συντηρηθούν από το προσωπικό χειρισμού. Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε την κύρια μονάδα. Μπορούν να ανοιχτούν μόνο οι άξονες για τα φίλτρα. Η συντήρηση των εσωτερικών εξαρτημάτων επιτρέπεται μόνο από τον κατασκευαστή ή από εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης πελατών.

Μη χρησιμοποιείτε προσαρτήματα ή καλώδια που δεν έχουν εγκριθεί ή δεν παρέχονται από τον κατασκευαστή.

Μη εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις ή ακατάλληλα παρελκόμενα μπορεί να προκαλέσουν τους ακόλουθους κινδύνους:

- Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
- Κίνδυνος τραυματισμού από εξαρτήματα με αιχμηρά άκρα, σπασίματα ή υπερφόρτωση.
- Κίνδυνος τραυματισμού λόγω δυσλειτουργιών.
- Αυξημένη εκπομπή ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών.
- Μειωμένη ατρωσία.

3.4 Κίνδυνοι λόγω μη εξουσιοδοτημένης λειτουργίας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη όταν είναι ενεργοποιημένη.

Φροντίστε ώστε μόνο εξουσιοδοτημένα άτομα να εργάζονται με τη συσκευή.

Φροντίστε ώστε η συσκευή να μην είναι προσβάσιμη σε παιδιά και να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά:

- Μικρά μέρη, όπως εργαλεία, μπορούν να καταποθούν.
- Κίνδυνος στραγγαλισμού λόγω του εύκαμπτου σωλήνα αναρρόφησης και του καλωδίου τροφοδοσίας.
- Επίσης, φυλάξτε το υλικό συσκευασίας μακριά από παιδιά. Κίνδυνος ασφυξίας από μέρη του υλικού συσκευασίας.

3.5 Κίνδυνοι λόγω ακατάλληλης θέσης εγκατάστασης

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Βεβαιωθείτε ότι δεν καλύπτεται η έξοδος αέρα στο πίσω μέρος της συσκευής.

Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης ισχύος και το βύσμα τροφοδοσίας είναι εύκολα προσβάσιμα, ώστε η συσκευή να μπορεί να αποσυνδεθεί γρήγορα από το ηλεκτρικό δίκτυο σε περίπτωση κινδύνου.

Μη λειτουργείτε τη συσκευή σε χώρους που περιέχουν εύφλεκτες ή εκρηκτικές ουσίες. Κίνδυνος πυρκαγιάς ή έκρηξης!

3.6 Κίνδυνοι από δυνητικά παθογόνα σωματίδια

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η συσκευή απορροφά το μεγαλύτερο μέρος των δυνητικά παθογόνων σωματιδίων και της σκόνης λείανσης. Ωστόσο, είναι πιθανό να εισπνέονται μικρές ποσότητες. Εκτοξευόμενα σωματίδια (θραύσματα νυχιών, τμήματα της επιφάνειας λείανσης) αποτελούν πηγή κινδύνου λόγω της εγγύτητάς τους στην περιοχή θεραπείας. Λάβετε τις ακόλουθες προφυλάξεις για να ελαχιστοποιήσετε τους κινδύνους:

- Πραγματοποιήστε σχολαστική αντισηψία του δέρματος πριν από τη θεραπεία.
- Φορέστε μάσκα αναπνοής, προστατευτικά γυαλιά και γάντια μίας χρήσης κατά τη διάρκεια της θεραπείας.
- Ελέγχετε καθημερινά τον εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης για ορατές ζημιές. Εάν το σύστημα αναρρόφησης έχει διαρροή, η ισχύς αναρρόφησης στη χειρολαβή θα μειωθεί.
- Να εργάζεστε με υψηλή ισχύ αναρρόφησης για όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο και να απενεργοποιείτε πλήρως τη λειτουργία αναρρόφησης μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο.
- Εάν είναι δυνατόν, αλλάξτε τα φίλτρα πριν αυτά γεμίσουν εντελώς. Ένας υψηλός βαθμός πλήρωσης μειώνει την ισχύ αναρρόφησης.

3.7 Κίνδυνοι λόγω ακατάλληλων ή ελαττωματικών εργαλείων

Χρησιμοποιείτε μόνο εργαλεία που πληρούν τις προδιαγραφές που αναφέρονται στη σελίδα 41.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Χρησιμοποιείτε μόνο άθικτα, μη παραμορφωμένα και απολυμασμένα εργαλεία.

Τα ακατάλληλα εργαλεία θέτουν σε κίνδυνο το άτομο που υποβάλλεται σε θεραπεία και εσάς τους ίδιους.

Ένα παραμορφωμένο ή κατεστραμμένο εργαλείο μπορεί επίσης να οδηγήσει σε δυσάρεστες δονήσεις της χειρολαβής.

Εάν έχουν πραγματοποιηθεί εργασίες με έκθεση σε μικρόβια, οι μη μολυσμένες περιοχές του δέρματος και των νυχιών πρέπει να υποβάλλονται σε θεραπεία με εργαλεία που έχουν προετοιμαστεί ειδικά για τον σκοπό αυτό κατά τη διάρκεια της επόμενης διαδικασίας εργασίας.

Ο καθαρισμός, η απολύμανση ή η επανεπεξεργασία των χρησιμοποιούμενων εργαλείων πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

3.8 Κίνδυνοι λόγω λανθασμένων ρυθμίσεων ή λανθασμένης χρήσης

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Να εργάζεστε πάντα με την ταχύτητα περιστροφής που καθορίζεται από τον κατασκευαστή του εργαλείου και να ελαχιστοποιείτε την πίεση και τον χρόνο θεραπείας.

Η λανθασμένη ταχύτητα περιστροφής, η υπερβολική πίεση ή η εργασία σε μια περιοχή για πολύ ώρα μπορεί να οδηγήσει σε ανεπιθύμητη τοπική ανάπτυξη θερμότητας, κάψιμο ή διάτρηση του δέρματος.

Πολύ υψηλή ταχύτητα περιστροφής μπορεί να οδηγήσει σε παραμόρφωση ή θραύση του εργαλείου. Αυτό θέτει σε κίνδυνο το άτομο που υποβάλλεται σε θεραπεία και εσάς τους ίδιους.

3.9 Κίνδυνοι λόγω κινούμενων εξαρτημάτων

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μαλλιά, κοσμήματα και ρούχα μπορούν να πιαστούν στα περιστρεφόμενα εξαρτήματα.

- **Αν έχετε μακριά μαλλιά, να τα έχετε πιασμένα ή να χρησιμοποιείτε προστατευτικό μαλλιών.**
- **Μη φοράτε κοσμήματα.**
- **Φοράτε στενά ρούχα εργασίας.**

Ενεργοποιείτε το μοτέρ χειρολαβής μόνο όταν κρατάτε τη χειρολαβή με ασφάλεια στο χέρι σας. Διαφορετικά, η χειρολαβή θα μπορούσε να κάνει ανεξέλεγκτες κινήσεις.

Αγγίζετε ένα εργαλείο που είναι στερεωμένο στη χειρολαβή μόνο όταν το εργαλείο δεν περιστρέφεται πλέον. Κίνδυνος τραυματισμού. Το εργαλείο λειτουργεί για λίγο μετά την απενεργοποίηση του μοτέρ χειρολαβής.

3.10 Κίνδυνοι λόγω νερού και υγρασίας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Διατηρείτε πάντοτε τη συσκευή στεγνή. Μην εκθέτετε τη συσκευή στις καιρικές συνθήκες.

Μη λειτουργείτε τη συσκευή κοντά σε μπανιέρες, νεροχύτες ή άλλα δοχεία με νερό.

Μην κρατάτε τη συσκευή κάτω από τρεχούμενο νερό και μην τη βυθίζετε σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.

Μην αναρροφάτε υγρά.

Μην αγγίζετε τη συσκευή με υγρά ή βρεγμένα χέρια.

Μην αγγίζετε τη συσκευή εάν έχει πέσει σε υγρό.

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από το δίκτυο μετά τη χρήση, καθώς η γειτνίαση με το νερό μπορεί να είναι επικίνδυνη ακόμη και όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.

Χρησιμοποιήστε για τη μεταφορά συσκευασία ή κουτί μεταφοράς που έχει σχεδιαστεί για τη συσκευή, προκειμένου να προστατεύσετε τη συσκευή από την υγρασία και τις μηχανικές ζημιές.

3.11 Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα

Τηρείτε τις ακόλουθες υποδείξεις για να αποφύγετε ανεπιθύμητες και δυνητικά επικίνδυνες επιδράσεις:

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αποφύγετε τη λειτουργία της συσκευής περιποίησης ποδιών απευθείας δίπλα ή τοποθετημένη πάνω σε άλλες συσκευές, καθώς αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε ελαττωματική λειτουργία. Εάν παρ' όλα αυτά είναι απαραίτητη η χρήση της συσκευής περιποίησης ποδιών με τον τρόπο που περιγράφεται παραπάνω, θα πρέπει να την παρακολουθείτε μαζί με την άλλη συσκευή για να βεβαιωθείτε ότι και οι δύο συσκευές λειτουργούν σωστά.

Εξασφαλίστε ελάχιστη απόσταση τουλάχιστον 30 cm (12 in) μεταξύ της συσκευής και φορητού επικοινωνιακού εξοπλισμού υψηλής συχνότητας. Στις συσκευές αυτές συγκαταλέγονται ασύρματα τηλέφωνα, κινητά τηλέφωνα, φορητοί υπολογιστές με λειτουργία WLAN ή Bluetooth και πρόσθετα εξαρτήματα, όπως καλώδια κεραίας και εξωτερικές κεραίες. Αυτός ο εξοπλισμός μπορεί να επηρεάσει τις ηλεκτρικές συσκευές.

Μη χρησιμοποιείτε προσαρτήματα ή καλώδια που δεν έχουν εγκριθεί ή δεν παρέχονται από τον κατασκευαστή. Η χρήση μη εγκεκριμένων προσαρτημάτων ή καλωδίων μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένες ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές ή μειωμένη ηλεκτρομαγνητική ατρωσία αυτής της συσκευής και, συνεπώς, να επηρεάσει τη λειτουργία της συσκευής.

3.12 Κίνδυνοι λόγω ανεπαρκούς απολύμανσης

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Καθαρίζετε και απολυμαίνετε τις εξωτερικές επιφάνειες της κύριας μονάδας, της μονάδας οθόνης και της χειρολαβής μετά από κάθε θεραπεία.

Καθαρίζετε και απολυμαίνετε την ανταλλακτική υποδοχή εργαλείου , το μοτέρ χειρολαβής, το εσωτερικό του περιβλήματος χειρολαβής και τον εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης Flex στο τέλος κάθε εργάσιμης ημέρας

Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιούνται μόνο απολυμασμένα εργαλεία.

Η ανεπαρκής απολύμανση μπορεί να οδηγήσει στη μετάδοση ασθενειών. Λάβετε επίσης υπόψη τις οδηγίες και τις συστάσεις του αρμόδιου εθνικού φορέα για την υγιεινή και την απολύμανση.

4 Περιεχόμενο συσκευασίας και συναρμολόγηση

4.1 Περιεχόμενο συσκευασίας

Ελέγξτε ότι την πληρότητα του περιεχόμενου της παράδοσης.

Στο περιεχόμενο συσκευασίας συμπεριλαμβάνονται:

1 κύρια μονάδα με μονάδα οθόνης
1 χειρολαβή με εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης Flex
1 καλώδιο τροφοδοσίας με βύσμα τύπου C (Euro plug)
1 καλώδιο τροφοδοσίας με βύσμα τύπου G (για Ηνωμένο Βασίλειο)
1 σακούλα φίλτρου σκόνης
1 φίλτρο HEPA
1 εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης
1 πιστοποιητικό συσκευής
1 βοήθημα αφαίρεσης, με όργανο μέτρησης φρέζας
1 στυλεός καθαρισμού
1 υγρό καθαρισμού
1 πρόσθετη ανταλλάξιμη κεφαλή σύσφιξης

4.2 Παράδοση


Η συσκευή παραδίδεται μέσα σε χαρτοκιβώτιο μεταφοράς. Το χαρτοκιβώτιο μεταφοράς προστατεύει τη συσκευή από ζημίες κατά τη μεταφορά. Τα υλικά της συσκευασίας επιλέχθηκαν με γνώμονα τη φιλικότητά τους προς το περιβάλλον και την απόρριψή τους και είναι ανακυκλώσιμα.

Φυλάξτε τη συσκευασία (χαρτοκιβώτιο, πλαστική σακούλα, κομμάτια από αφρώδες υλικό PU) και χρησιμοποιήστε το κουτί μεταφοράς για να αποστείλετε τη συσκευή για εργασίες συντήρησης.

4.3 Συνθήκες αποθήκευσης


Θερμοκρασία και υγρασία περιβάλλοντος κατά τη μεταφορά και την αποθήκευση: -25°C (χωρίς έλεγχο της σχετικής ατμοσφαιρικής υγρασίας) έως +70°C (με σχετική ατμοσφαιρική υγρασία 15% έως 93%, χωρίς συμπύκνωση).


Επιτρεπόμενη ατμοσφαιρική πίεση:
700 έως 1060 hPa

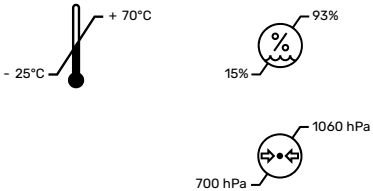

4.4 Συναρμολόγηση συσκευής

Η κύρια μονάδα και η χειρολαβή με τον εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης Flex παραδίδονται χωριστά.

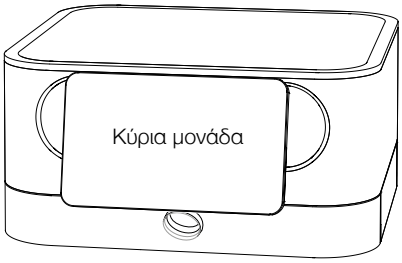


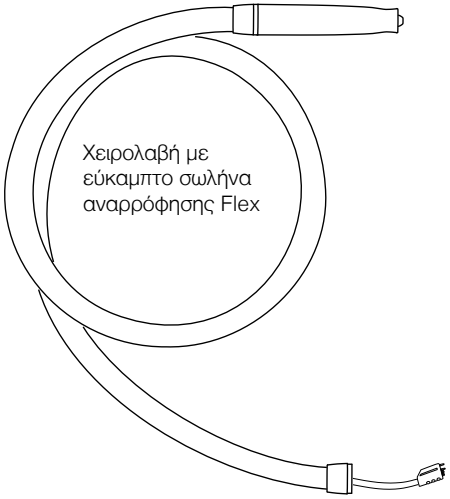


Συναρμολογήστε τα εξαρτήματα όπως περιγράφεται στις επόμενες δύο σελίδες.

Περιεχόμενο συσκευασίας και συναρμολόγηση


1. Αφαιρέστε το κάλυμμα από την κύρια μονάδα.

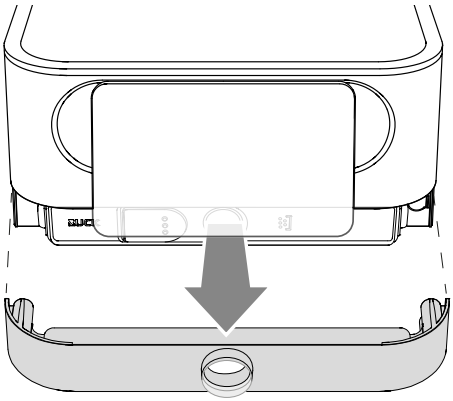


2. Αφαιρέστε το σωληνωτό τεμάχιο σύνδεσης από το κάλυμμα.

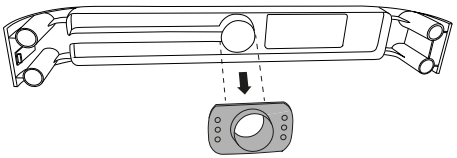

3. Περάστε το βύσμα του καλωδίου του μοτέρ μέσα από το άνοιγμα του καλύμματος.

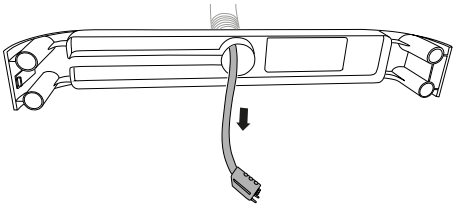


4. Βιδώστε τον εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης Flex στο κάλυμμα.

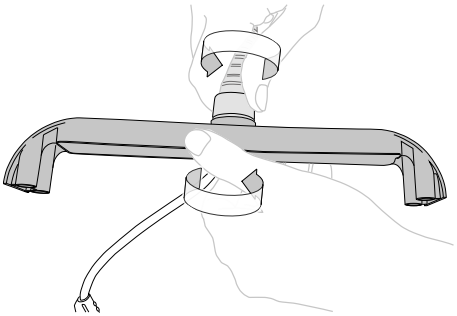


5. **Ωθήστε** το βύσμα του καλωδίου μοτέρ **από επάνω** μέσα στον οδηγό του καλύμματος. Μην πιέζετε το βύσμα από το πλάι.

   Το βύσμα έχει τοποθετηθεί σωστά, όταν η προεξοχή ασφάλισης κουμπώσει.

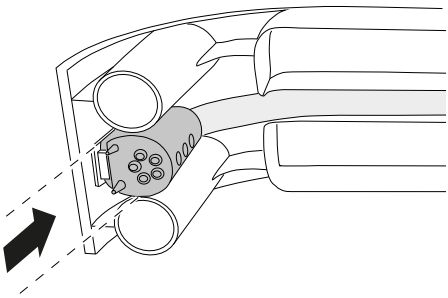



6. Τοποθετήστε το σωληνωτό τεμάχιο σύνδεσης στο άνοιγμα του καλύμματος.

   Δώστε προσοχή στον προσανατολισμό του σωληνωτού τεμαχίου σύνδεσης: Το σωληνωτό τεμάχιο σύνδεσης έχει μια εσοχή για το καλώδιο του μοτέρ.

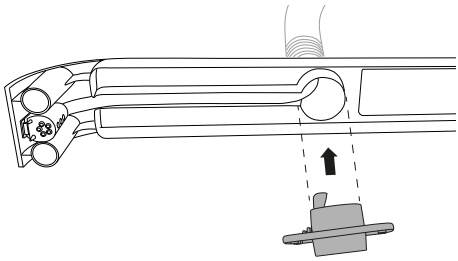

7. Περάστε το κάλυμμα μαζί με τον εύκαμπτο σωλήνα που κρέμεται από αυτό μέσα στην κύρια μονάδα.

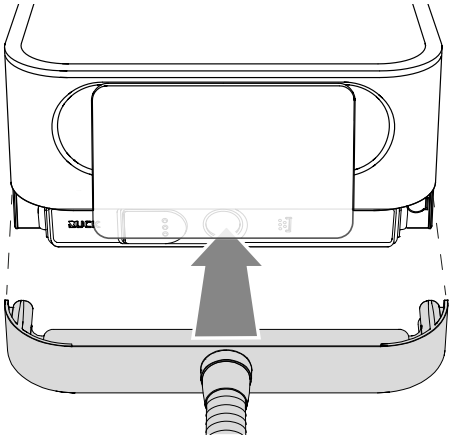

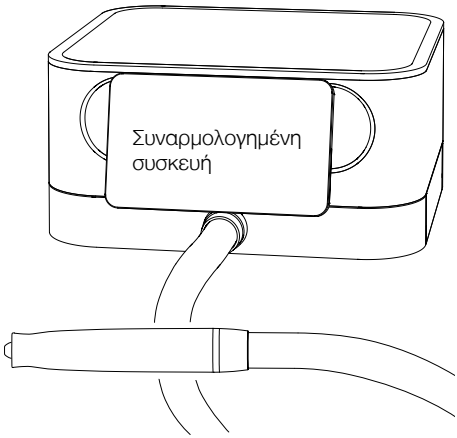


5 Χειρισμός και λειτουργία

5.1 Εγκατάσταση

Τοποθετήστε την κύρια μονάδα σε μια σταθερή, επίπεδη επιφάνεια.

Βεβαιωθείτε ότι κανένα μέρος της συσκευής δεν ακτινοβολείται από τον ήλιο. Η έκθεση στο ηλιακό φως μπορεί να επηρεάσει την αναγνωσιμότητα της οθόνης και να παρεμποδίσει τη λειτουργία αναρρόφησης και την ψύξη της συσκευής.


Αφαιρέστε την προστατευτική μεμβράνη από την οθόνη.

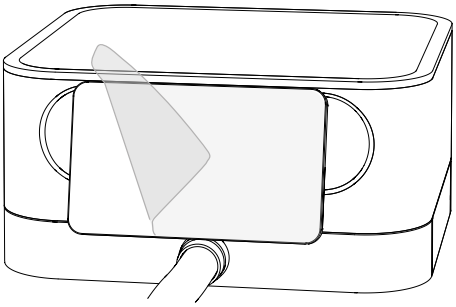

5.2 Σύνδεση και ενεργοποίηση

1. Συνδέστε τη συσκευή σε μια πρίζα με το καλώδιο τροφοδοσίας.
2. Ενεργοποιήστε τον διακόπτη ισχύος.

Το υλικολογισμικό της συσκευής ξεκινά.

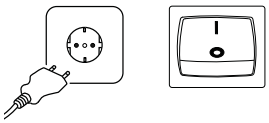

Όταν ενεργοποιείτε τη συσκευή για πρώτη φορά, η συσκευή σάς ζητά να επιλέξετε την επιθυμητή γλώσσα. Επιλέξτε μια γλώσσα.



Εμφανίζεται παραπομπή στις οδηγίες χρήσης.

Αγγίξτε το τικ για να συνεχίσετε.



Η συσκευή είναι τώρα έτοιμη για λειτουργία.

Μόλις τοποθετήσετε ένα εργαλείο (βλ. σελίδα 41), μπορείτε να ξεκινήσετε τη χρήση.

5.3 Οθόνη με λειτουργία αφής



Η οθόνη είναι ευαίσθητη στην αφή. Μπορείτε να επιλέξετε λειτουργίες και να αλλάξετε τιμές πατώντας και σαρώνοντας με το δάχτυλό σας. Μπορείτε να χειρίζεστε την οθόνη αφής, ακόμη και όταν φοράτε γάντια μίας χρήσης από νιτρίλιο, λατέξ ή βινύλιο.


ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Να χειρίζεστε την οθόνη μόνο με τα δάχτυλά σας. Ο χειρισμός της οθόνης με σκληρά αντικείμενα μπορεί να χαράξει ή να προκαλέσει ζημιά στην επιφάνειά της.

5.4 Κύριες προβολές της οθόνης


Υπάρχουν 2 κύριες προβολές μεταξύ των οποίων μπορείτε εύκολα να εναλλάσσετε:

1. **Βασική προβολή**, βλ. σελίδα 28.
2. **Προβολή αγαπημένων**, βλ. σελίδα 32.

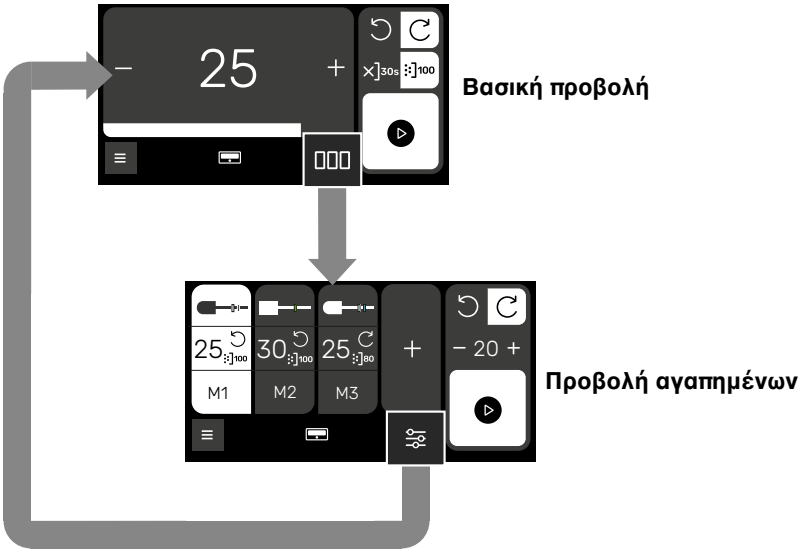

Εναλλαγή μεταξύ των κύριων προβολών

5.5 Βασική προβολή

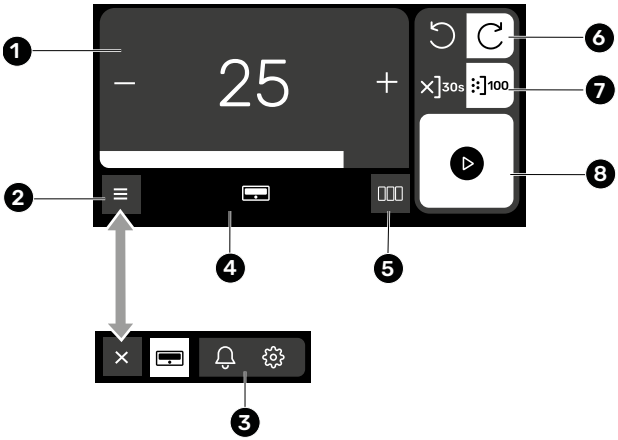

Βασική προβολή

1 Στοιχεία για την εμφάνιση και τη χειροκίνητη ρύθμιση της ταχύτητας

2 Αναπτυσσόμενο κουμπί πλοήγησης

3 Στοιχεία πλοήγησης, βλ. σελίδα 35

4 Γραμμή πλοήγησης και πληροφοριών


5 Κουμπί αγαπημένων:
Μεταβείτε στην προβολή αγαπημένων, βλ. σελίδα 32.

6 Επιλογή της φοράς περιστροφής

7 Δεξιό κουμπί:
Επιλογή της ισχύος αναρρόφησης (σε %)
Αριστερό κουμπί:
Απενεργοποίηση της λειτουργίας αναρρόφησης.

8 Κουμπί εκκίνησης/διακοπής του μοτέρ χειρολαβής

5.5.1 Ρύθμιση ταχύτητας περιστροφής

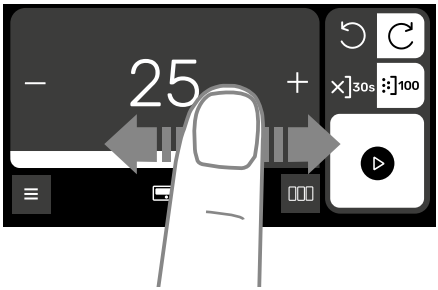

Ο εμφανιζόμενος αριθμός πολλαπλασιασμένος επί 1000 δίνει την τρέχουσα ταχύτητα σε στροφές ανά λεπτό.


Μπορείτε να αλλάξετε την ταχύτητα περιστροφής με τα κουμπιά + και - ή κάνοντας κύλιση από τα αριστερά προς τα δεξιά ή από τα δεξιά προς τα αριστερά.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Να εργάζεστε πάντα στις ταχύτητες περιστροφής που προβλέπονται από τον κατασκευαστή του μηχανήματος.


Πολύ υψηλή ταχύτητα περιστροφής μπορεί να οδηγήσει σε παραμόρφωση ή θραύση του εργαλείου. Αυτό θέτει σε κίνδυνο το άτομο που υποβάλλεται σε θεραπεία και εσάς τους ίδιους.

5.5.2 Ρύθμιση φοράς περιστροφής

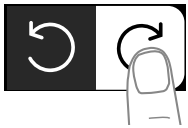


Αγγίξτε το αντίστοιχο σύμβολο βέλους για να επιλέξετε τη φορά περιστροφής.

Μπορείτε να επιλέξετε τη φορά περιστροφής πριν από την ενεργοποίηση του μοτέρ χειρολαβής ή όταν το μοτέρ βρίσκεται ήδη σε λειτουργία.

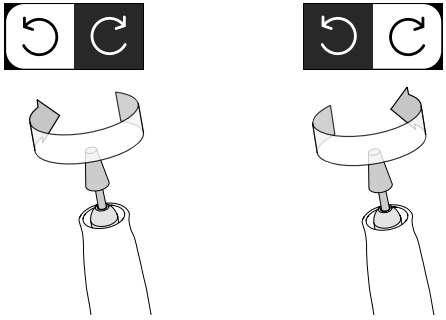

5.5.3 Ρύθμιση ισχύος αναρρόφησης


Εάν πατήσετε το κουμπί για την ισχύ αναρρόφησης (δεξιό κουμπί), θα εμφανιστούν και άλλες διαθέσιμες τιμές ισχύος αναρρόφησης. Διατίθενται 5 επίπεδα: Ισχύς αναρρόφησης από 20% έως 100%.

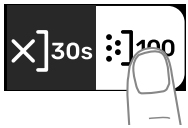

Αγγίξτε την επιθυμητή τιμή για να αλλάξετε την ισχύ αναρρόφησης.



Για να συλλέξετε δειγματοληπτικό υλικό, μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε εντελώς τη λειτουργία αναρρόφησης για σύντομο χρονικό διάστημα. Η διάρκεια κατά την οποία η λειτουργία αναρρόφησης απενεργοποιείται είναι περιορισμένη στα 30 δευτερόλεπτα. Μετά την παρέλευση των 30 δευτερολέπτων, η χειρολαβή και η μονάδα αναρρόφησης απενεργοποιούνται αυτόματα. Στη συνέχεια, η συσκευή επανέρχεται σε ισχύ αναρρόφησης 100%.

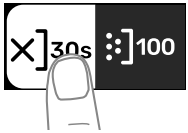

Πατήστε το αριστερό κουμπί για να απενεργοποιήσετε προσωρινά τη λειτουργία αναρρόφησης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Να εργάζεστε με υψηλή ισχύ αναρρόφησης για όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο και να απενεργοποιείτε πλήρως τη λειτουργία αναρρόφησης μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο.

Η υψηλή ισχύς αναρρόφησης διατηρεί τον αέρα του χώρου καθαρό και μειώνει τον κίνδυνο μεταφοράς δυνητικά παθογόνων σωματιδίων και σκόνης λείανσης.

Η υψηλή ισχύς αναρρόφησης διατηρεί επίσης τη συσκευή κρύα και αυξάνει τη διάρκεια ζωής της συσκευής.

5.5.4 Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του μοτέρ χειρολαβής

Αφαιρέστε τη χειρολαβή από τη βάση χειρολαβής. Το μοτέρ χειρολαβής μπορεί να εκκινηθεί μόνο όταν η χειρολαβή δεν βρίσκεται στη βάση χειρολαβής.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ενεργοποιείτε το μοτέρ χειρολαβής μόνο όταν κρατάτε τη χειρολαβή με ασφάλεια στο χέρι σας. Διαφορετικά, η χειρολαβή θα μπορούσε να κάνει ανεξέλεγκτες κινήσεις.

Πατήστε το κουμπί έναρξης/διακοπής για να ενεργοποιήσετε το μοτέρ χειρολαβής.


Όσο το μοτέρ λειτουργεί, το κουμπί εκκίνησης/διακοπής είναι κόκκινο.

Πατήστε το κόκκινο κουμπί έναρξης/διακοπής για να απενεργοποιήσετε το μοτέρ χειρολαβής.



Εάν μεταβείτε σε ένα μενού στο οποίο δεν εμφανίζεται το κουμπί εκκίνησης/διακοπής (π.χ. στο μενού «Ρυθμίσεις»), το μοτέρ απενεργοποιείται μόνο του.

Η συσκευή μπορεί να ρυθμιστεί κατά τρόπο ώστε το μοτέρ χειρολαβής να εκκινείται αυτόματα όταν η χειρολαβή αφαιρείται από τη βάση (βλ. σελίδα 38). Σε αυτή την περίπτωση, το κουμπί εκκίνησης/διακοπής εμφανίζει το σύμβολο «A» για την αυτόματη λειτουργία και δεν μπορεί να λειτουργήσει χειροκίνητα. Ωστόσο, το κουμπί έναρξης/διακοπής λειτουργεί πάντα όταν η χειρολαβή δεν βρίσκεται στη βάση χειρολαβής, ανεξάρτητα από το αν είναι ενεργή η αυτόματη λειτουργία. Όσο η χειρολαβή βρίσκεται στη βάση, δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί. Εάν το κουμπί εκκίνησης/διακοπής πατηθεί παρ' όλα αυτά, το σύμβολο εκκίνησης εμφανίζεται με γκρι χρώμα αντί για λευκό.

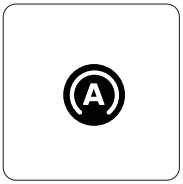


5.6 Προβολή αγαπημένων

Στην **προβολή αγαπημένων**, μπορείτε να έχετε γρήγορη πρόσβαση σε αποθηκευμένες τιμές για συγκεκριμένα εργαλεία στη συσκευή περιποίησης ποδιών. Ένα σύνολο αποθηκευμένων τιμών ονομάζεται «Αγαπημένα». Μπορείτε να ορίσετε έως και 4 αγαπημένα. Τα αγαπημένα επισημαίνονται με M1 έως M4. Το επιλεγμένο, ενεργό αγαπημένο επισημαίνεται με λευκό χρώμα.

Για να εμφανιστούν αγαπημένα σε αυτή την προβολή, πρέπει να δημιουργηθούν αγαπημένα, βλ. σελίδα 33.

Στη δεξιά πλευρά υπάρχουν κουμπιά για τη χειροκίνητη επιλογή της φοράς περιστροφής και της ταχύτητας περιστροφής. Εάν αλλάξετε χειροκίνητα τη φορά περιστροφής ή την ταχύτητα περιστροφής, απενεργοποιείται ένα ενεργό αγαπημένο.

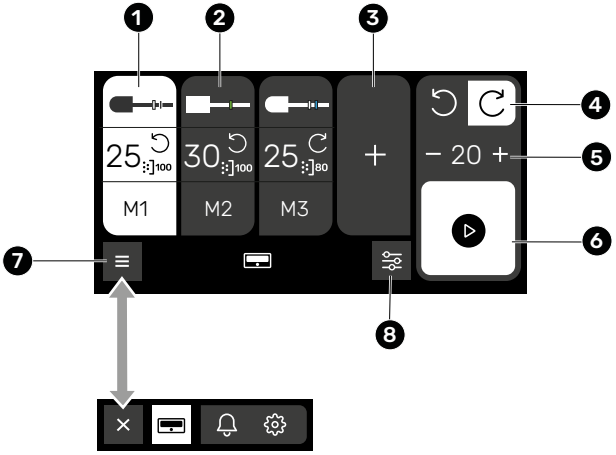

Προβολή αγαπημένων

1 Ενεργό αγαπημένο

2 Μη ενεργό αγαπημένο

3 Κουμπί ΣΥΝ για να δημιουργήσετε ένα αγαπημένο

4 Επιλογή της φοράς περιστροφής

5 Επιλογή ταχύτητας περιστροφής με τα κουμπιά + και -

6 Κουμπί εκκίνησης/διακοπής του μοτέρ χειρολαβής

7 Αναπτυσσόμενο κουμπί πλοήγησης

8 Μετάβαση στη βασική προβολή, βλ. σελίδα 28.

5.6.1 Δημιουργία αγαπημένων




Η δημιουργία αγαπημένων είναι απλή και διαισθητική. Μπορούν να καθοριστούν όλες οι βασικές τιμές που πρέπει να εφαρμόζονται σε ένα συγκεκριμένο εργαλείο.

Αγγίξτε το κουμπί ΣΥΝ για να μεταβείτε στην προβολή επεξεργασίας.

Μόλις μεταβείτε στην προβολή επεξεργασίας, το μοτέρ χειρολαβής σταματά αυτόματα.

Μπορείτε να αλλάξετε τις επιμέρους τιμές των αγαπημένων ανά πάσα στιγμή, βλ. σελίδα 34.

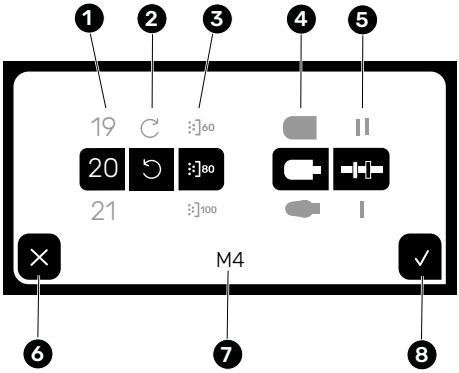

Αγαπημένα — Προβολή επεξεργασίας

1 Επιλογή της ταχύτητας περιστροφής

2 Επιλογή της φοράς περιστροφής

3 Επιλογή της ισχύος αναρρόφησης (σε %)

4 Επιλογή του συμβόλου για την κεφαλή του εργαλείου

5 Επιλογή του συμβόλου των δακτυλίων σήμανσης για τον άξονα του εργαλείου

6 Ακύρωση


7 Ονομασία αγαπημένου (M1 - M4)

8 Επιβεβαίωση

5.6.2 Επεξεργασία ή διαγραφή ενός αγαπημένου

Εάν ένα αγαπημένο είναι επιλεγμένο (επισημασμένο με λευκό χρώμα), μπορείτε να το επεξεργαστείτε. Πατήστε το αγαπημένο για 2 δευτερόλεπτα για να εμφανιστούν οι επιλογές επεξεργασίας.

Οι επιλογές εμφανίζονται σε ένα παράθυρο πάνω από το προς επεξεργασία αγαπημένο.

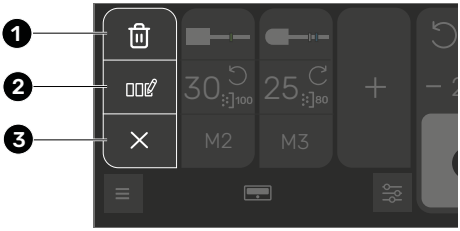

Επιλογες επεξεργασιας για αγαπημενο

2 δευτερόλεπτα




1 Διαγράφει το αγαπημένο.

2 Ενεργοποιεί τη λειτουργία επεξεργασίας, βλ. σελίδα 33.

3 Ματαιώνει την επεξεργασία.


5.7 Λειτουργία αναμονής

Μετά από 30 λεπτά αδράνειας, η οθόνη μαυρίζει και η συσκευή μεταβαίνει σε κατάσταση αναμονής.
Με το πάτημα του κουμπιού στο πίσω μέρος της οθόνης, η συσκευή ενεργοποιείται και πάλι.

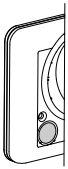

Μπορείτε επίσης να εμφανίσετε τη λειτουργία αναμονής με μια κίνηση:

Σε οποιαδήποτε προβολή, σύρετε το δάχτυλό σας από το κάτω άκρο της οθόνης προς τα επάνω.

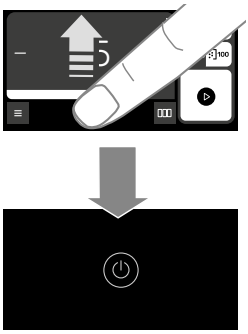

5.8 Στοιχεία πλοήγησης

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα στοιχεία πλοήγησης για να μεταβείτε σε διαφορετικά μενού ή πληροφορίες. Το ενεργό μενού εμφανίζεται με μαύρο χρώμα σε λευκό φόντο.



Συσκευή περιποίησης ποδιών
Σύμβολο για τη συσκευή περιποίησης ποδιών.

Μηνύματα
Εμφανίζει ενεργές υποδείξεις και μηνύματα προειδοποίησης, βλ. σελίδα 72.

Ρυθμίσεις
Εμφανίζει το μενού **Ρυθμίσεις**, βλ. σελίδα 36.

Μόλις μεταβείτε σε μια προβολή στην οποία δεν είναι πλέον ορατό το κουμπί εκκίνησης/διακοπής του μοτέρ χειρολαβής, το μοτέρ χειρολαβής σταματά αυτόματα. Η αυτόματη απενεργοποίηση του μοτέρ γίνεται για την ασφάλειά σας.

5.9 Λειτουργίες του μενού «Ρυθμίσεις»

Μέσω του μενού **Ρυθμίσεις** μπορείτε να εμφανίσετε τις πληροφορίες της συσκευής, να κλειδώσετε την οθόνη και να πλοηγηθείτε σε άλλα μενού.

< = Επιστροφή στο προηγούμενο μενού.

Το μοτέρ χειρολαβής είναι απενεργοποιημένο όσο είναι ορατό το μενού **Ρυθμίσεις** ή ένα από τα υπομενού του. Η αυτόματη απενεργοποίηση του μοτέρ γίνεται για την ασφάλειά σας.

Πλοήγηση:

> Ρυθμίσεις



Ρυθμίσεις συσκευής


Εμφανίζει το μενού **Ρυθμίσεις συσκευής**, βλ. σελίδα 38.



Λειτουργία απολύμανσης


Κλειδώνει την οθόνη για 60 δευτερόλεπτα. Κατά τη διάρκεια αυτού του χρονικού διαστήματος, η οθόνη μπορεί να καθαριστεί ή να απολυμανθεί. Όσο το κλείδωμα είναι ενεργό, εμφανίζεται ο υπολειπόμενος χρόνος του κλειδώματος (σε δευτερόλεπτα).

Αν θέλετε να μειώσετε τον υπολειπόμενο χρόνο, μπορείτε να πατήσετε το κουμπί κάτω αριστερά. Αυτό μειώνει τον υπολειπόμενο χρόνο κλειδώματος στα 3 δευτερόλεπτα.

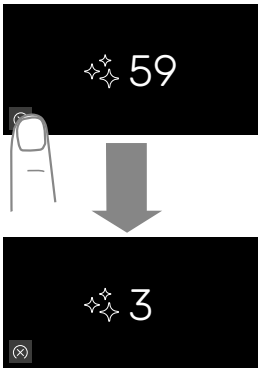

Μπορείτε επίσης να εμφανίσετε τη λειτουργία απολύμανσης με μια κίνηση:

Σε οποιαδήποτε προβολή, σύρετε με 2 δάχτυλα από το επάνω άκρο της οθόνης προς τα κάτω.

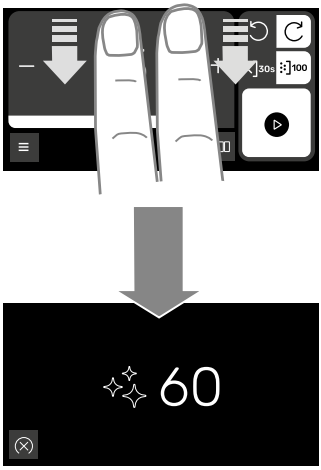



Βοήθεια

Εμφανίζει το μενού **Βοήθεια**, βλ. σελίδα 40.



Κατάσταση συσκευής

Εμφανίζει τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή:

- **Βαθμός πλήρωσης της σακούλας φίλτρου σκόνης**
- **Ώρες λειτουργίας μέχρι την αντικατάσταση του φίλτρου HEPA**
- **Ώρες λειτουργίας της συσκευής**
- **Ώρες λειτουργίας μέχρι την επόμενη συντήρηση**
- **Θερμοκρασία του στροβίλου αναρρόφησης**
- **Έκδοση υλικολογισμικού**

5.10 Λειτουργίες του μενού «Ρυθμίσεις συσκευής»

Μπορείτε να ρυθμίσετε συγκεκριμένες λειτουργίες της συσκευής στο μενού **Ρυθμίσεις συσκευής**.

< = Επιστροφή στο προηγούμενο μενού.

Πλοήγηση:

> Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις συσκευής



Φωτεινότητα

Επιτρέπει τη ρύθμιση της φωτεινότητας της οθόνης.
Διατίθενται 8 επίπεδα φωτεινότητας.



Βάση χειρολαβής

Επιτρέπει τον έλεγχο της εκκίνησης του μοτέρ χειρολαβής μέσω της βάσης χειρολαβής.

Το μοτέρ χειρολαβής εκκινείται αυτόματα όταν η χειρολαβή ανυψώνεται από τη βάση χειρολαβής.

Το σύμβολο με λευκό φόντο είναι ενεργό.

(A) = Αυτόματη λειτουργία (λειτουργία ενεργή).

(A) = Καμία αυτόματη λειτουργία (λειτουργία μη ενεργή).





Καθαρισμός εύκαμπτου σωλήνα


Λειτουργία χρονοδιακόπτη για να σας υπενθυμίζει να καθαρίσετε τον εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης Flex.
Μπορείτε να ρυθμίσετε τον χρονοδιακόπτη σε μια τιμή μεταξύ 5 και 35 ωρών λειτουργίας. Εργοστασιακή ρύθμιση: 20 ώρες λειτουργίας.
Μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε εντελώς την υπενθύμιση.

Περιγραφή της αφαίρεσης του σωλήνα αναρρόφησης: Σελίδα 58.



Γλώσσα

Μπορείτε να επιλέξετε τη γλώσσα των εμφανιζόμενων κειμένων μέσω ενός μενού επιλογής. Η γλώσσα των κειμένων στο μενού επιλογής είναι η αντίστοιχη εθνική γλώσσα και δεν μπορεί να αλλάξει.

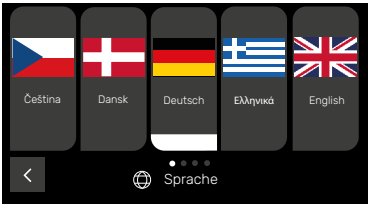

5.11 Λειτουργίες στο μενού «Βοήθεια»

Στο μενού **Βοήθεια** θα βρείτε πληροφορίες που θα σας βοηθήσουν σε διάφορες ερωτήσεις.

< = Επιστροφή στο προηγούμενο μενού.


Πλοήγηση:

> Ρυθμίσεις > Βοήθεια



Οδηγίες χρήσης

Εμφανίζει έναν σύνδεσμο προς έναν ιστότοπο ως κωδικό QR. Σαρώστε τον σύνδεσμο για να αποκτήσετε πρόσβαση στην ηλεκτρονική έκδοση των οδηγιών χρήσης.

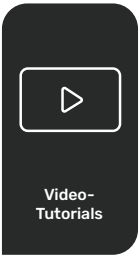


Εκπαιδευτικά βίντεο

Εμφανίζει έναν σύνδεσμο προς έναν ιστότοπο ως κωδικό QR. Σαρώστε τον κωδικό QR για να αποκτήσετε πρόσβαση στο κανάλι βίντεο της RUCK.

5.12 Εργαλεία

Η συσκευή παρέχεται χωρίς εργαλεία. Τα εργαλεία αυτά, γνωστά και ως «περιστροφικά εργαλεία», αποτελούνται από ένα εξάρτημα εφαρμογής (**1**) και ένα στέλεχος (**2**).

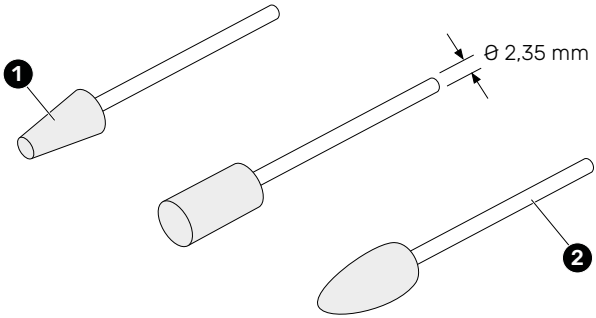

Το σχήμα, η σύνθεση και το μέγεθος του τμήματος εφαρμογής καθορίζουν την προβλεπόμενη χρήση. Ανάλογα με τη χρήση για την οποία προορίζονται, τα εργαλεία ονομάζονται επίσης «φρέζες», «λειαντήρες», «στιλβωτήρες».

5.12.1 Χρησιμοποιήσιμα εργαλεία

Τα κατάλληλα εργαλεία υψηλής ποιότητας και χωρίς ζημιές αποτελούν βασική προϋπόθεση για την ασφαλή, αποτελεσματική και ομαλή θεραπεία και για τη μακρά διάρκεια ζωής της συσκευής. Χρησιμοποιείτε μόνο εργαλεία με τις ακόλουθες ιδιότητες:

- **Τυποποιημένο, κυλινδρικό στέλεχος με διάμετρο 2,35 mm (+0 έως - 0,016 mm) (ΤΥΠΟΣ 2, σύμφωνα με DIN EN ISO 1797-1)**
- **Ελάχιστη διάμετρος του εξαρτήματος εργασίας (σώμα φρέζας/σώμα λειαντήρα): 0,5 mm**
- **Μέγιστη διάμετρος του εξαρτήματος εργασίας (σώμα φρέζας/σώμα λειαντήρα): 16 mm**
- **Ευθύ στέλεχος (όχι λυγισμένο)**
- **Εξάρτημα εργασίας χωρίς ζημιές**

Μπορείτε να βρείτε τα κατάλληλα εργαλεία στους ιστοτόπους μας:
hellmut-ruck.de
ch.hellmut-ruck.de (Ελβετία)
hellmut-ruck.uk (Ηνωμένο Βασίλειο)

hellmut-ruck.de

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Χρησιμοποιείτε μόνο άθικτα, μη παραμορφωμένα και απολυμασμένα εργαλεία.

Τα ακατάλληλα εργαλεία θέτουν σε κίνδυνο το άτομο που υποβάλλεται σε θεραπεία και εσάς τους ίδιους.


Ένα παραμορφωμένο ή κατεστραμμένο εργαλείο μπορεί επίσης να οδηγήσει σε δυσάρεστες δονήσεις της χειρολαβής.

Εάν έχουν πραγματοποιηθεί εργασίες με έκθεση σε μικρόβια, οι μη μολυσμένες περιοχές του δέρματος και των νυχιών πρέπει να υποβάλλονται σε θεραπεία με εργαλεία που έχουν προετοιμαστεί ειδικά για τον σκοπό αυτό κατά τη διάρκεια της επόμενης διαδικασίας εργασίας.

Ο καθαρισμός, η απολύμανση ή η επανεπεξεργασία των χρησιμοποιούμενων εργαλείων πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.


Συμβουλή:

Για να ελέγξετε τη διάμετρο και την ευθύτητα του στελέχους ενός εργαλείου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το βοήθημα αφαίρεσης.

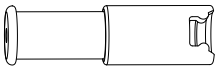


5.12.2 Τοποθέτηση εργαλείου στη χειρολαβή

Το εργαλείο συγκρατείται στη χειρολαβή από την ανταλλάξιμη κεφαλή σύσφιξης. Όταν το μοτέρ χειρολαβής είναι απενεργοποιημένο, το εργαλείο μπορεί απλώς να αφαιρεθεί από την ανταλλάξιμη κεφαλή σύσφιξης ή να τοποθετηθεί σε αυτήν.

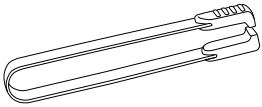

Για εργαλεία με ιδιαίτερα λεπτό ή κωνικό εξάρτημα εργασίας, συνιστούμε τη χρήση της πένσας φρέζας (αρ. προϊόντος 2126401).

Κατά την τοποθέτηση ενός εργαλείου, βεβαιωθείτε ότι το στέλεχος έχει εισέλθει όσο το δυνατόν βαθύτερα.

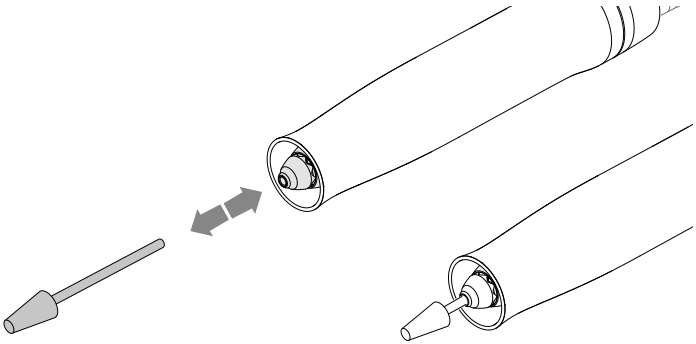

5.12.3 Αντικατάσταση εργαλείου

ΠΡΟΣΟΧΗ

Να αντικαθιστάτε ένα εργαλείο μόνο όταν το μοτέρ χειρολαβής είναι απενεργοποιημένο και το εργαλείο δεν περιστρέφεται πλέον. Κίνδυνος τραυματισμού. Το εργαλείο λειτουργεί για λίγο μετά την απενεργοποίηση του μοτέρ χειρολαβής.


Εάν αφαιρείτε ένα εργαλείο από την υποδοχή εργαλείου ή το τοποθετείτε στην υποδοχή εργαλείου ενώ το μοτέρ λειτουργεί, μειώνεται επίσης η διάρκεια ζωής της υποδοχής εργαλείου.

Ρυθμίστε την κατάλληλη ταχύτητα περιστροφής για το εργαλείο που χρησιμοποιείται. Να εργάζεστε πάντα με την ταχύτητα περιστροφής που καθορίζεται από τον κατασκευαστή του εργαλείου.

5.13 Εργονομικό κράτημα της χειρολαβής


5.13.1 Κράτημα χειρολαβής σαν πένα

Κρατώντας τη χειρολαβή σαν πένα, μπορείτε να πραγματοποιείτε λεπτεπίλεπτες εργασίες με εργονομία και ακρίβεια.

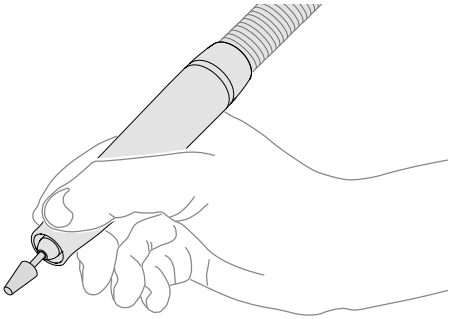


5.13.2 Κράτημα χειρολαβής από επάνω

Κρατώντας τη χειρολαβή από επάνω και στηρίζοντάς τη με τον αντίχειρα, μπορείτε να εκτελείτε στοχευμένα και άνετα εργασίες σε μεγάλες επιφάνειες.

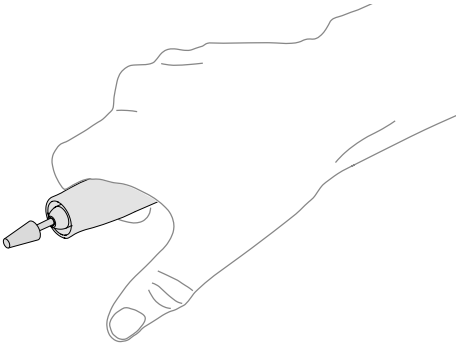


5.14 Αντικατάσταση σακούλας φίλτρου σκόνης

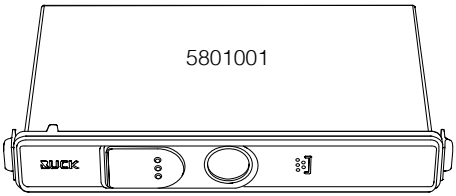


Η σακούλα φίλτρου σκόνης (αρ. προϊόντος 5801001) πρέπει να αντικαθίσταται όταν φτάσει σε βαθμό πλήρωσης 80%. Μετά το 80%, η ισχύς αναρρόφησης της συσκευής μειώνεται προοδευτικά.

Η συσκευή εμφανίζει σχετικό μήνυμα όταν ο βαθμός πλήρωσης φτάσει το 60%. Με αυτόν τον τρόπο θα έχετε αρκετό χρόνο για να προγραμματίσετε την αντικατάσταση.

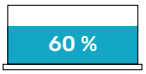

Όταν ο βαθμός πλήρωσης φτάσει το 80%, η συσκευή εμφανίζει ένα ακόμη μήνυμα.

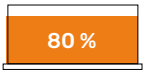

Αντικαταστήστε τη σακούλα φίλτρου σκόνης το αργότερο όταν το φίλτρο είναι εντελώς γεμάτο (100%). Η χωρητικότητά του επαρκεί για έως και 150 θεραπείες.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσιες σακούλες φίλτρου σκόνης. Χρησιμοποιείτε κάθε σακούλα φίλτρου σκόνης μόνο 1 φορά. Μην αδειάζετε τις σακούλες φίλτρου σκόνης για να τις ξαναχρησιμοποιήσετε.

Φοράτε κατάλληλη προστατευτική μάσκα αναπνοής όταν αντικαθιστάτε τη σακούλα φίλτρου σκόνης. Έτσι ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος λοίμωξης από δυνητικά παθογόνο σκόνη λείανσης.

5.14.1 Αντικατάσταση της σακούλας φίλτρου σκόνης με ενεργοποιημένη τη συσκευή


Μπορείτε να αντικαταστήσετε τη σακούλα φίλτρου σκόνης όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη. Ωστόσο, το μοτέρ χειρολαβής πρέπει να είναι απενεργοποιημένο. Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, η οθόνη εμφανίζει μηνύματα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Ακολουθήστε τις πληροφορίες που εμφανίζονται στην οθόνη.


5.14.2 Αφαίρεση γεμάτης σακούλας φίλτρου σκόνης

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Μην τραβάτε τον εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης, για να αφαιρέσετε το κάλυμμα της σακούλας φίλτρου σκόνης. Αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στον εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης ή στη σύνδεση μεταξύ του εύκαμπτου σωλήνα αναρρόφησης και του καλύμματος και να προκαλέσει διαρροή. Τυχόν διαρροή θα μειώσει την ισχύ αναρρόφησης στη χειρολαβή.


1. Κρατήστε το κάλυμμα της σακούλας φίλτρου σκόνης από αριστερά και στα δεξιά. Τραβήξτε το κάλυμμα μαζί με τον εύκαμπτο σωλήνα που κρέμεται από αυτό έξω από την κύρια μονάδα.
   Κατά την ενεργοποίηση της συσκευής, εμφανίζεται το μήνυμα «**Το κάλυμμα της σακούλας φίλτρου σκόνης είναι ανοιχτό**». Το μήνυμα εξαφανίζεται όταν επανατοποθετήσετε το κάλυμμα.
2. Σύρετε τη γλωττίδα σφράγισης πάνω από το άνοιγμα της σακούλας φίλτρου σκόνης για να σφραγίσετε τη σακούλα φίλτρου σκόνης.
3. Λυγίστε τις πλευρικές γλωττίδες της σακούλας φίλτρου σκόνης ελαφρώς προς τα έξω (με τους δείκτες των δαχτύλων σας) για να αποδεσμεύσετε τη σακούλα φίλτρου σκόνης. Για να το κάνετε αυτό πρέπει να ασκήσετε λίγη δύναμη.
4. Τραβήξτε τη σακούλα φίλτρου σκόνης έξω από τον άξονα φίλτρου.
5. Απορρίψτε τη σακούλα φίλτρου σκόνης.

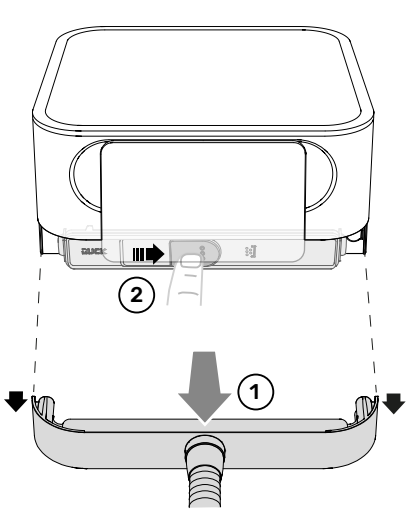


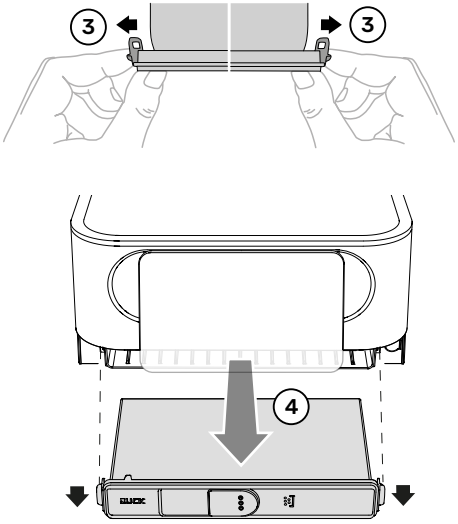


5.14.3 Τοποθέτηση νέας σακούλας φίλτρου σκόνης

1. Ωθήστε τη νέα σακούλα φίλτρου σκόνης μέσα στον άξονα φίλτρου μέχρι οι πλευρικές γλωττίδες να κουμπώσουν στη θέση τους με χαρακτηριστικό ήχο.
   Η σακούλα φίλτρου σκόνης είναι συμμετρική. Κατά την τοποθέτηση δώστε προσοχή στον σωστό προσανατολισμό.
2. Περάστε το κάλυμμα μαζί με τον εύκαμπτο σωλήνα που κρέμεται από αυτό μέσα στην κύρια μονάδα.

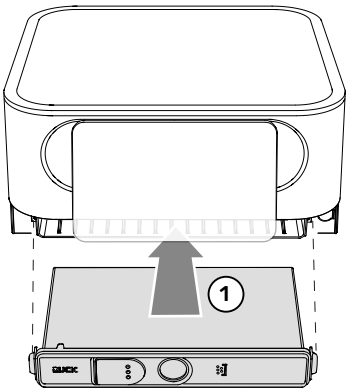

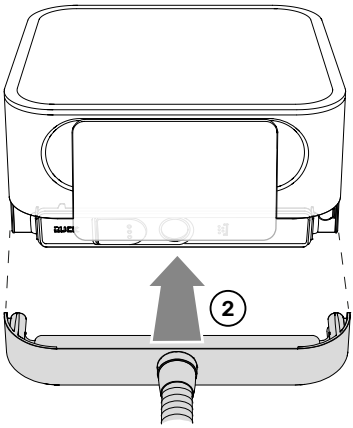


Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, μετά την τοποθέτηση του καλύμματος, εμφανίζεται το μήνυμα «**Αντικατάσταση φίλτρου: Σακούλα φίλτρου σκόνης.**».

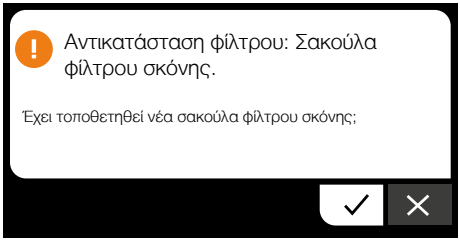

Αγγίξτε το τικ για να επιβεβαιώσετε την αλλαγή φίλτρου.

5.15 Αντικατάσταση φίλτρου HEPA

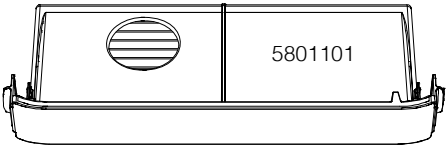

Το φίλτρο HEPA (αρ. προϊόντος 5801101) πρέπει να αντικαθίσταται όταν συμπληρώσει 390 ώρες λειτουργίας. Μετά από 390 ώρες λειτουργίας, η ισχύς αναρρόφησης της συσκευής μειώνεται προοδευτικά.

Ήδη μετά από 370 ώρες λειτουργίας (υπόδειξη αντικατάστασης 1), η συσκευή εμφανίζει σχετικό μήνυμα. Με αυτόν τον τρόπο θα έχετε αρκετό χρόνο για να προγραμματίσετε την αντικατάσταση.

Μετά από 390 ώρες λειτουργίας (υπόδειξη αντικατάστασης 2), η συσκευή εμφανίζει σχετικό μήνυμα.

Αντικαταστήστε το φίλτρο το αργότερο μετά από 400 ώρες λειτουργίας.







ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ


Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια φίλτρα HEPA. Χρησιμοποιείτε κάθε φίλτρο HEPA μόνο 1 φορά.

Φοράτε κατάλληλη προστατευτική μάσκα αναπνοής κατά την αντικατάσταση του φίλτρου HEPA για να ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο λοίμωξης από πιθανώς παθογόνο σκόνη λείανσης.

5.15.1 Αντικατάσταση του φίλτρου HEPA με ενεργοποιημένη τη συσκευή

Μπορείτε να αντικαταστήσετε το φίλτρο HEPA όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη. Ωστόσο, το μοτέρ χειρολαβής πρέπει να είναι απενεργοποιημένο. Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, η οθόνη εμφανίζει μηνύματα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Ακολουθήστε τις πληροφορίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Μόλις πραγματοποιήσετε και επιβεβαιώσετε την αντικατάσταση, ο μετρητής ωρών λειτουργίας του φίλτρου HEPA επανέρχεται στο 0 (μηδέν).

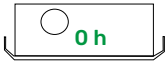

5.15.2 Αλλαγή του φίλτρου HEPA όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη ή σε κατάσταση αναμονής

Εάν έχετε αντικαταστήσει το φίλτρο HEPA όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη ή σε κατάσταση αναμονής, η συσκευή δεν έχει καταγράψει την εν λόγω αλλαγή.


Εάν έχουν περάσει περισσότερες από 500 ώρες λειτουργίας από την τελευταία επιβεβαιωμένη αντικατάσταση, την επόμενη φορά που θα θέσετε σε λειτουργία ή θα αφυπνίσετε τη συσκευή θα εμφανιστεί το μήνυμα «**Το φίλτρο HEPA είναι γεμάτο**».




Στη συνέχεια, μπορείτε να επαναφέρετε τον μετρητή πατώντας το σύμβολο ανακύκλωσης (κάτω δεξιά).

5.15.3 Αφαίρεση ολόκληρου του φίλτρου HEPA


1. Κρατήστε το κάλυμμα του φίλτρου HEPA από αριστερά και στα δεξιά. Αφαιρέστε το κάλυμμα.
2. Λυγίστε τις πλευρικές γλωττίδες του φίλτρου HEPA ελαφρώς προς τα έξω (με τους δείκτες των δαχτύλων σας) για να αποδεσμεύσετε το φίλτρο HEPA. Για να το κάνετε αυτό πρέπει να ασκήσετε λίγη δύναμη.
3. Τραβήξτε το φίλτρο HEPA έξω από τον άξονα φίλτρου.
4. Απορρίψτε το φίλτρο HEPA.

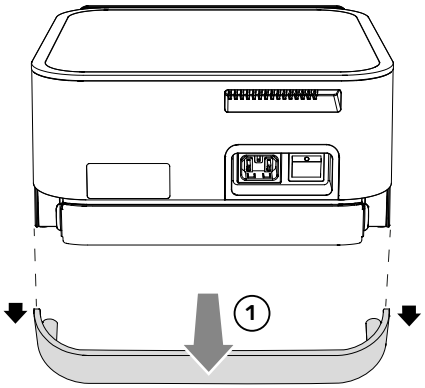


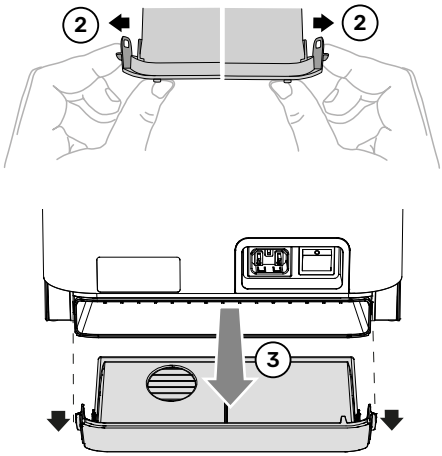


5.15.4 Τοποθέτηση νέου φίλτρου HEPA

1. Ωθήστε το νέο φίλτρο HEPA μέσα στον άξονα φίλτρου μέχρι οι πλευρικές γλωττίδες να κουμπώσουν στη θέση τους με χαρακτηριστικό ήχο.
   Το φίλτρο δεν είναι συμμετρικό. Κατά την τοποθέτηση δώστε προσοχή στον σωστό προσανατολισμό.
2. Ωθήστε το κάλυμμα μέσα στην κύρια μονάδα.

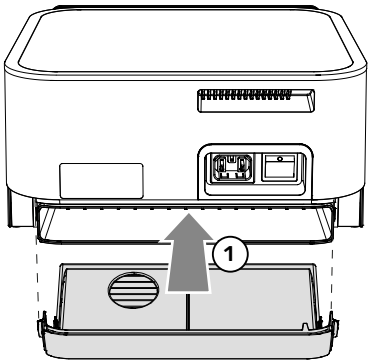

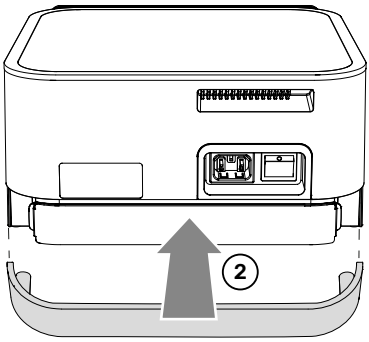


Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, μετά την τοποθέτηση του φίλτρου HEPA, εμφανίζεται το μήνυμα «**Αντικατάσταση φίλτρου: Φίλτρο HEPA**».

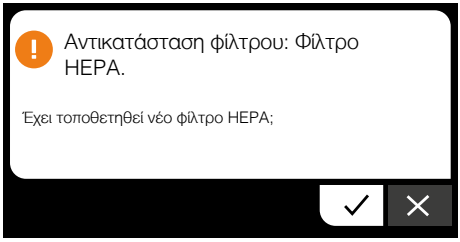

Αγγίξτε το τικ για να επιβεβαιώσετε την αλλαγή φίλτρου.

Με αυτόν τον τρόπο, ο μετρητής ωρών λειτουργίας του φίλτρου HEPA επαναφέρεται στο 0 (μηδέν).

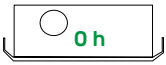


5.16 Ακεραιότητα της κύριας μονάδας

Εκτός από τη σακούλα φίλτρου σκόνης και το φίλτρο HEPA, η κύρια μονάδα δεν περιέχει εξαρτήματα που μπορούν να αντικατασταθούν από το προσωπικό χειρισμού. Μην ανοίγετε την κύρια μονάδα. Σε περίπτωση ανοίγματος της συσκευής χάνεται η αξίωση παροχής εγγύησης!

5.17 Απενεργοποίηση

Για να απενεργοποιήσετε εντελώς τη συσκευή, απλώς αποσυνδέστε την από την παροχή ρεύματος. Για να το κάνετε αυτό, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τον διακόπτη ισχύος ή να αποσυνδέσετε το βύσμα τροφοδοσίας από την πρίζα.

Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης ισχύος και το βύσμα τροφοδοσίας είναι εύκολα προσβάσιμα, ώστε η συσκευή να μπορεί να αποσυνδεθεί γρήγορα από το ηλεκτρικό δίκτυο σε περίπτωση κινδύνου.

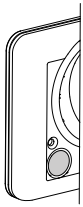

Για να θέσετε τη συσκευή σε κατάσταση αναμονής, αγγίξτε το κουμπί στο πίσω μέρος (δεξιά) της οθόνης.

Για να εξέλθετε από τη λειτουργία αναμονής, αγγίξτε ξανά το κουμπί.

6 Συντήρηση και εγγύηση

6.1 Τακτική συντήρηση από το τμήμα τεχνικής εξυπηρέτησης της RUCK

Η ασφάλεια και η αξιοπιστία του προϊόντος μπορούν να διασφαλιστούν μακροπρόθεσμα μόνο εάν ορισμένα εξαρτήματα ελέγχονται ή αντικαθίστανται τακτικά από ειδικούς. Τα φθαρμένα εξαρτήματα πρέπει να αντικαθίστανται με γνήσια ανταλλακτικά.

Συνιστούμε, επομένως, να αναθέτετε τη συντήρηση του προϊόντος στο τμήμα τεχνικής εξυπηρέτησης της RUCK μετά από **κάθε 1200 ώρες λειτουργίας** ή **κάθε 36 μήνες** – όποιο από τα δύο επέλθει πρώτο.

Στις εργασίες συντήρησης περιλαμβάνεται και ένας έλεγχος ηλεκτρικής ασφάλειας σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 60335-1.

Εάν έχουν περάσει 1160 ή περισσότερες ώρες λειτουργίας από την τελευταία συντήρηση, η συσκευή θα σας υπενθυμίσει ότι πρέπει να γίνει συντήρηση.

Τμήμα τεχνικής εξυπηρέτησης της RUCK:

HELLMUT RUCK GmbH, Daimlerstraße 23, DE–75305 Neuenbürg
Τηλέφωνο +49 (0)7082 944 22 55
Φαξ +49 (0)7082 944 22 59
service@hellmut-ruck.de

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Σε περίπτωση λειτουργίας της συσκευής περιποίησης ποδιών χωρίς την απαιτούμενη τακτική συντήρηση, την ευθύνη αναλαμβάνετε εσείς οι ίδιοι.

Οι εργασίες συντήρησης και επισκευής πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο από εξουσιοδοτημένο εξειδικευμένο προσωπικό.

Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη ή εγγύηση σε περίπτωση ανεπαρκούς συντήρησης ή μη εξουσιοδοτημένης συντήρησης ή επισκευής.

6.1.1 Πύλη επιστροφών και τεχνικής εξυπηρέτησης

Υπεύθυνοι λειτουργίας από τη Γερμανία και την Αυστρία:
Για να απλοποιήσετε τη διεκπεραίωση της παραγγελίας συντήρησης, χρησιμοποιήστε την πύλη επιστροφής και τεχνικής εξυπηρέτησης.

Κάντε κλικ σε αυτόν τον σύνδεσμο ή σαρώστε τον κωδικό QR.

https://qr.de/RUCKServiceportalPODOLOGNOVA

6.2 Τακτική συντήρηση από το προσωπικό χειρισμού

6.2.1 Επισκόπηση

Χρονικό διάστημα	Στοιχείο	Εργασία
Πριν από κάθε θεραπεία	Καθαρισμός και απολύμανση των εργαλείων. Εάν απαιτείται: Προετοιμασία (αποστείρωση) εργαλείων.	
Μετά από κάθε θεραπεία	Εξωτερικές επιφάνειες της χειρολαβής, της μονάδας οθόνης και της κύριας μονάδας	Καθαρισμός και απολύμανση (απολύμανση με απολυμαντικά μαντηλάκια)
Στο τέλος της εργάσιμης ημέρας	Εξωτερική πλευρά του εύκαμπτου σωλήνα αναρρόφησης Flex	Καθαρισμός και απολύμανση (απολύμανση με απολυμαντικά μαντηλάκια)
Στο τέλος της εργάσιμης ημέρας	Ανταλλακτική υποδοχή εργαλείου, μοτέρ χειρολαβής και εσωτερικό περιβλήματος χειρολαβής	Καθαρισμός και απολύμανση (απολύμανση με απολυμαντικά μαντηλάκια)
Στο τέλος της εργάσιμης ημέρας	Κύρια μονάδα, χειρολαβή, εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης Flex, καλώδιο τροφοδοσίας	Οπτικός έλεγχος (έλεγχος για ρωγμές και ζημιές)
Κάθε 20 ώρες λειτουργίας (1 φορά τον μήνα)	Εσωτερική πλευρά του εύκαμπτου σωλήνα αναρρόφησης Flex	Καθαρισμός και απολύμανση (απολύμανση σε λουτρό απολύμανσης)

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Καθαρίζετε και απολυμαίνετε τη συσκευή κατά τα καθορισμένα χρονικά διαστήματα. Η ανεπαρκής απολύμανση μπορεί να οδηγήσει στη μετάδοση ασθενειών. Λάβετε επίσης υπόψη τις οδηγίες και τις συστάσεις του αρμόδιου εθνικού φορέα για την υγιεινή και την απολύμανση.

6.1.2 Καθαρισμός και απολύμανση

Για τον καθαρισμό των εξωτερικών επιφανειών μπορείτε να αφήσετε τη συσκευή ενεργοποιημένη. Εντούτοις, μη χρησιμοποιείτε υγρά ή σπρέι. Χρησιμοποιήστε τη «Λειτουργία απολύμανσης» για να καθαρίσετε την οθόνη όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, βλ. σελίδα 36.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μη χρησιμοποιείτε υγρά ή σπρέι για τον καθαρισμό και την απολύμανση.

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

6.2.2 Κατάλληλα προϊόντα καθαρισμού και απολύμανσης

Για τον καθαρισμό και την απολύμανση των επιφανειών χρησιμοποιήστε τα απολυμαντικά μαντηλάκια επιφανειών της RUCK, με αλκοόλη (αρ. προϊόντος 2966201, 2967601 ή 2970901).

Αφήστε επαρκή χρόνο για τον καθαρισμό και το στέγνωμα.

Χρόνοι δράσης για απολυμαντικά:

1 λεπτό για βακτήρια

5 λεπτά για μύκητες

Στέγνωμα:

Οι επιφάνειες πρέπει να στεγνώνουν εντελώς πριν από την επόμενη θεραπεία. Αφήστε τις επιφάνειες να στεγνώσουν στον αέρα. Μη σκουπίζετε τις επιφάνειες για να τις στεγνώσετε.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη συσκευασία ή πάνω στο απολυμαντικό.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Σε περίπτωση χρήσης ακατάλληλου εξοπλισμού καθαρισμού και απολύμανσης μπορεί να αλλάξει το χρώμα, η δομή και οι ιδιότητες των επιφανειών και να προκληθεί ζημιά στα εξαρτήματα.

Μη χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά, όπως γαλάκτωμα λείανσης, σφουγγάρια καθαρισμού ή άλλα παρόμοια μέσα που μπορεί να περιέχουν λειαντικά σωματίδια. Επίσης, καθαριστικά πανιά από συνθετικές ίνες μπορούν να έχουν λειαντική επίδραση και, συνεπώς, ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιές στις επιφάνειες.

Βεβαιωθείτε ότι ο εξοπλισμός καθαρισμού που χρησιμοποιείτε είναι καθαρός. Ανόργανα υπολείμματα, όπως σωματίδια άμμου και σκόνης, στον εξοπλισμό καθαρισμού μπορούν να χαράξουν τις επιφάνειες.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ


Ο καθαρισμός, η απολύμανση ή η επανεπεξεργασία των χρησιμοποιούμενων εργαλείων πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

6.2.3 Καθαρισμός και απολύμανση της υποδοχής εργαλείου, του μοτέρ χειρολαβής και του εσωτερικού του περιβλήματος χειρολαβής


ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος.

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

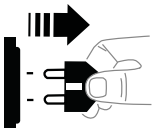

Ξεβιδώστε το περίβλημα χειρολαβής ώστε η υποδοχή εργαλείου (σύνδεσμος και ανταλλάξιμη κεφαλή σύσφιξης) και το μοτέρ χειρολαβής να είναι εμφανή. Τώρα μπορείτε να καθαρίσετε και να απολυμάνετε αυτά τα εξαρτήματα και το εσωτερικό του περιβλήματος χειρολαβής.

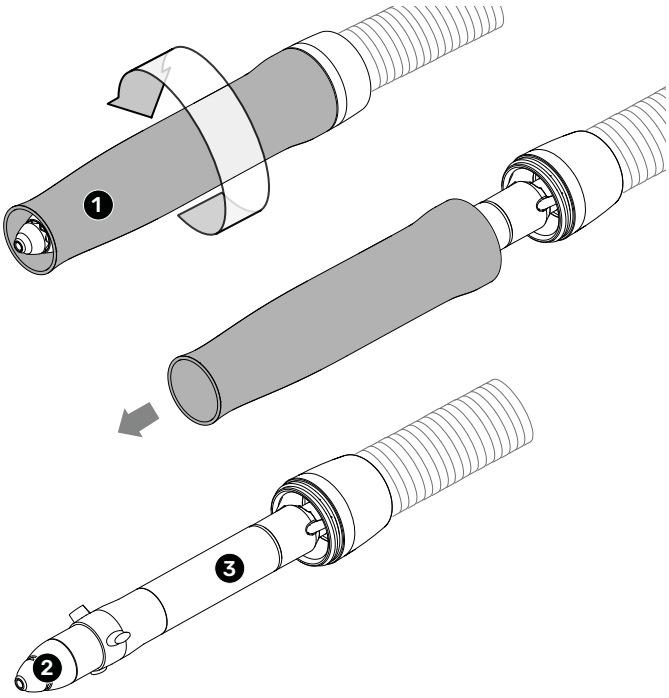

1 Περίβλημα χειρολαβής


2 Υποδοχή εργαλείου

3 Μοτέρ χειρολαβής

6.3 Αντικατάσταση της ανταλλάξιμης κεφαλής σύσφιξης της χειρολαβής

Μετά από μεγάλη περίοδο χρήσης, είναι δυνατόν η ανταλλάξιμη κεφαλή σύσφιξης να μη συγκρατεί πλέον επαρκώς το τοποθετημένο εργαλείο, με αποτέλεσμα το εργαλείο να μην περιστρέφεται πλέον όταν ενεργοποιείται το μοτέρ χειρολαβής ή το εργαλείο να μην μπορεί πλέον να εισαχθεί στην υποδοχή εργαλείου. Αυτή η υποβάθμιση της λειτουργίας της ανταλλάξιμης κεφαλής σύσφιξης είναι φυσιολογική και δεν αποτελεί αιτία παραπόνων.

Εάν η ανταλλάξιμη κεφαλή σύσφιξης δεν επιτελεί πλέον τη λειτουργία της, μπορείτε εύκολα να την αντικαταστήσετε μόνοι σας.

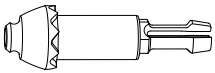

Αρ. προϊόντος 5801701


Χρησιμοποιείτε μόνο κατάλληλα εργαλεία που δεν έχουν υποστεί ζημιά, προκειμένου να εξασφαλίσετε μεγάλη διάρκεια ζωής της ανταλλάξιμης κεφαλής σύσφιξης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ


Κατά την αντικατάσταση της ανταλλάξιμης κεφαλής σύσφιξης ενδέχεται να απελευθερωθούν μολυσμένα σωματίδια σκόνης. Συνεπώς, να φοράτε κατάλληλη προστατευτική μάσκα που καλύπτει το στόμα και μύτη.


Στη συνέχεια, απολυμάνετε τον χώρο εργασίας και τη συσκευή με ένα κατάλληλο απολυμαντικό επιφανειών.

Ξεβιδώστε το περίβλημα χειρολαβής από τον εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης για να αποκτήσετε πρόσβαση στην ανταλλάξιμη κεφαλή σύσφιξης.

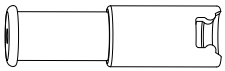

Χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο βοήθημα αφαίρεσης για να αφαιρέσετε την ανταλλάξιμη κεφαλή σύσφιξης από το σώμα της χειρολαβής.

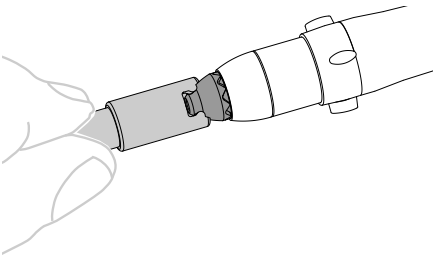

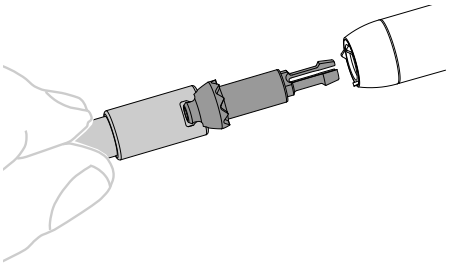

6.4 Καθαρισμός εύκαμπτου σωλήνα αναρρόφησης Flex και καλωδίου μοτέρ


Καθαρίζετε την εσωτερική επιφάνεια του σωλήνα αναρρόφησης Flex και το καλώδιο μοτέρ τουλάχιστον κάθε 20 ώρες λειτουργίας. Έχοντας τον εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης καθαρό, διατηρείτε υψηλή ισχύς αναρρόφησης και αποτρέπετε τη συσσώρευση μεγάλης ποσότητας δυνητικά παθογόνων σωματιδίων.

Μετά τον καθαρισμό του εύκαμπτου σωλήνα αναρρόφησης σε λουτρό απολύμανσης, ο εύκαμπτος σωλήνας πρέπει να στεγνώσει πριν από την επανατοποθέτησή του. Χρόνος στεγνώματος: περ. 12 ώρες. Εάν καθαρίσετε τον εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης το βράδυ, μπορείτε να τον επανατοποθετήσετε το πρωί.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ


Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος.

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

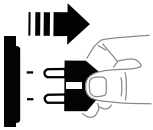

6.4.1 Αφαίρεση εύκαμπτου σωλήνα αναρρόφησης και καλωδίου μοτέρ


1. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος.
2. Τραβήξτε το μπροστινό κάλυμμα μαζί με τον εύκαμπτο σωλήνα που κρέμεται από αυτό έξω από την κύρια μονάδα.
3. Αφαιρέστε το σωληνωτό τεμάχιο σύνδεσης από το κάλυμμα.
4. Πιέστε την προεξοχή ασφάλισης (**1**) μακριά από το βύσμα του καλωδίου μοτέρ και σπρώξτε το βύσμα έξω από την υποδοχή (**2**).

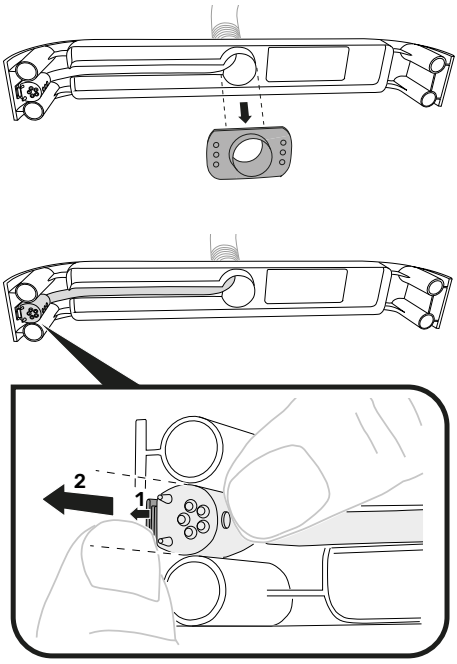

Για να αποφευχθεί το μπέρδεμα του καλωδίου μοτέρ κατά την εξαγωγή του από τον εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης και τη μετέπειτα επανατοποθέτησή του στον εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το παρεχόμενο βοήθημα συγκράτησης καλωδίου.

Το βοήθημα συγκράτησης καλωδίου αποτελείται από 2 μέρη και σχηματίζει ένα κάλυμμα γύρω από το βύσμα του καλωδίου μοτέρ.


Βοήθημα συγκράτησης καλωδίου

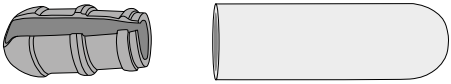


1 - υποδοχή καλωδίου

2 - προστατευτικό κάλυμμα


5. Πιέστε το καλώδιο του μοτέρ από το βύσμα μέσα στην υποδοχή καλωδίου του βοηθήματος συγκράτησης καλωδίου.

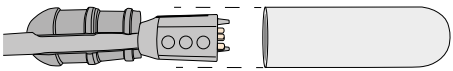


6. Ωθήστε το προστατευτικό καπάκι γύρω από το βύσμα μέχρι το προστατευτικό καπάκι και η υποδοχή καλωδίου να γίνουν ένα ενιαίο σύνολο.

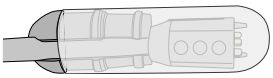


7. Ξεβιδώστε το κάλυμμα από τον εύκαμπτο σωλήνα απορρόφησης.

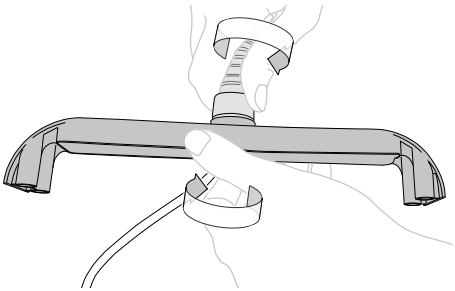

8. Ξεβιδώστε το περίβλημα χειρολαβής από τον εύκαμπτο σωλήνα απορρόφησης.

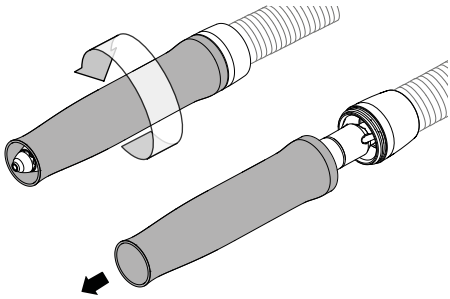

9. Κρατήστε το μοτέρ χειρολαβής με το ένα χέρι και τραβήξτε τον εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης (**2**) από το καλώδιο μοτέρ (**1**) με το άλλο χέρι.

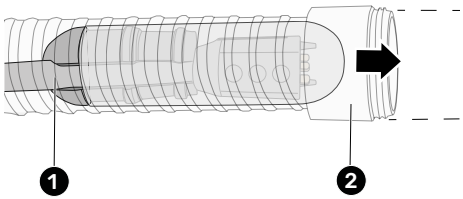

6.4.2 Καθαρισμός και στέγνωμα


Καθαρίστε το καλώδιο μοτέρ με απολυμαντικά μαντηλάκια.

Τοποθετήστε τον εύκαμπτο σωλήνα σε λουτρό απολύμανσης για να καθαρίσετε το εσωτερικό του εύκαμπτου σωλήνα.

Αναρτήστε τον εύκαμπτο σωλήνα κατακόρυφα για να στεγνώσει καλά. Αφήστε τον εύκαμπτο σωλήνα να στεγνώσει για τουλάχιστον 12 ώρες, για παράδειγμα όλη τη νύχτα.

Φροντίστε ώστε ο αέρας στο δωμάτιο να μπορεί να κυκλοφορεί καλά και αερίστε το δωμάτιο όποτε είναι δυνατόν. Η υψηλή υγρασία και η κακή κυκλοφορία του αέρα παρατείνουν τον χρόνο στεγνώματος.

Για να αναρτήσετε τον εύκαμπτο σωλήνα κατακόρυφα, συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε το σετ αξεσουάρ καθαρισμού του εύκαμπτου σωλήνα (αρ. προϊόντος 5801901).

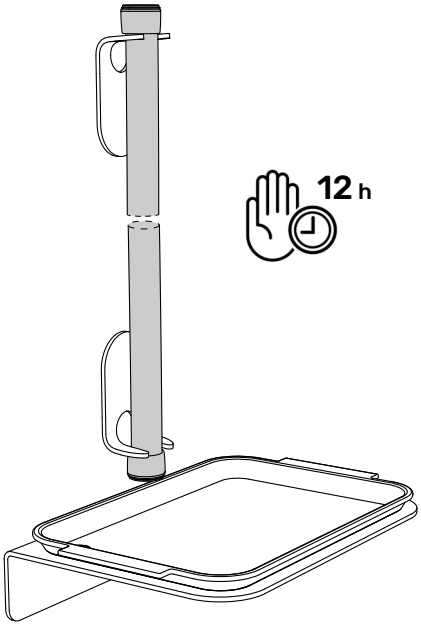

6.4.3 Συναρμολόγηση

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Επανατοποθετήστε τον εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης στη συσκευή μόνο όταν το **εσωτερικό του εύκαμπτου σωλήνα είναι εντελώς στεγνό**. Το στέγνωμα διαρκεί περίπου 12 ώρες.



Εάν ο εύκαμπτος σωλήνας είναι ακόμα υγρός ή βρεγμένος, η υγρασία μπορεί να προκαλέσει ζημιά στα φίλτρα και σε άλλα εξαρτήματα!


Όταν ο εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης στεγνώσει εντελώς, μπορείτε να συναρμολογήσετε ξανά τον εύκαμπτο σωλήνα και το καλώδιο μοτέρ.

Συναρμολογήστε τα επιμέρους εξαρτήματα με την αντίστροφη σειρά από την αποσυναρμολόγηση.


Κατά τη συναρμολόγηση του βύσματος του καλωδίου μοτέρ δώστε προσοχή στα εξής:

Ωθήστε το βύσμα **από επάνω** μέσα στον οδηγό του καλύμματος. Μην πιέζετε το βύσμα από το πλάι.

Το βύσμα έχει τοποθετηθεί σωστά, όταν η προεξοχή ασφάλισης κουμπώσει.

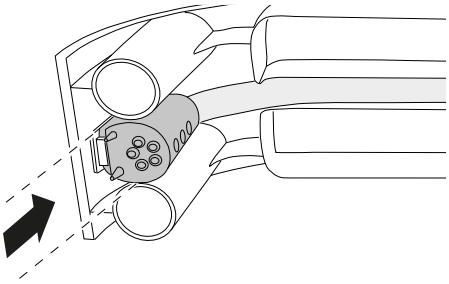


Φροντίστε να τοποθετήσετε σωστά το σωληνωτό τεμάχιο σύνδεσης στο κάλυμμα: Το σωληνωτό τεμάχιο σύνδεσης έχει μια εσοχή για το καλώδιο του μοτέρ.

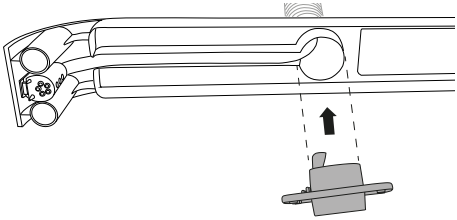

6.5 Αντικατάσταση του συνδέσμου για την ανταλλάξιμη κεφαλή σύσφιξης

Μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα λειτουργίας, η χειρολαβή μπορεί να κάνει πιο δυνατούς ή διαφορετικούς θορύβους από ό,τι στην αρχή της χρήσης της. Σε αυτή την περίπτωση, ο σύνδεσμος της ανταλλακτικής κεφαλής σύσφιξης έχει φθαρεί και θα πρέπει να αντικατασταθεί.

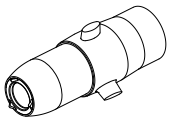


Αρ. προϊόντος 4959301

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε την αντικατάσταση μόνοι σας:


ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος.


Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

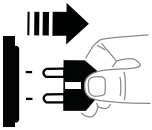

1. Ξεβιδώστε το περίβλημα χειρολαβής από τον εύκαμπτο σωλήνα απορρόφησης.

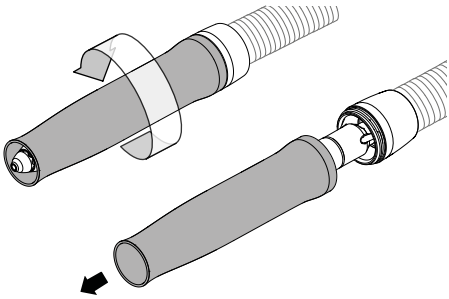

2. Ξεβιδώστε τον σύνδεσμο από το μοτέρ χειρολαβής.

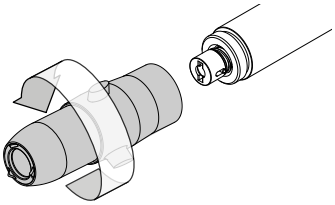


3. Βιδώστε προσεκτικά τον νέο σύνδεσμο στο μοτέρ.
   Περιστρέψτε τον σύνδεσμο ασκώντας μόνο **ελαφριά πίεση**.
   Εάν ασκήσετε πολλή πίεση κατά την περιστροφή, θα προκληθεί ζημιά στο μηχανισμό του συνδέσμου.

   Εάν αισθανθείτε αντίσταση κατά την περιστροφή, **μη συνεχίσετε να περιστρέφετε τον σύνδεσμο**, αλλά χαλαρώστε τον κατά ένα τέταρτο της περιστροφής.


   Στη συνέχεια, περιστρέψτε το άκρο του συνδέσμου κατά ένα τέταρτο της περιστροφής προς τα εμπρός ή προς τα πίσω.

   Δοκιμάστε να βιδώσετε ξανά τον σύνδεσμο στο μοτέρ.

   Εάν είναι απαραίτητο, επαναλάβετε αυτό αρκετές φορές μέχρι ο σύνδεσμος να βιδωθεί στο μοτέρ **χωρίς αντίσταση**.

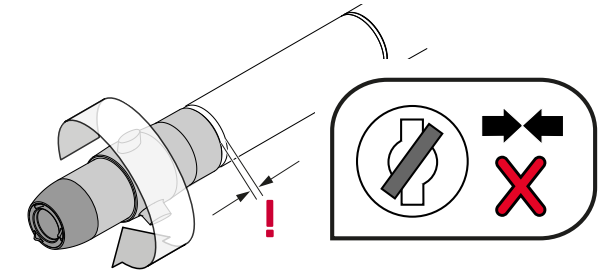

Αντίσταση κατά την περιστροφή του συνδέσμου: **Μη συνεχίσετε να περιστρέφετε!** Τα μέρη του μηχανισμού συνδέσμου δεν εφαρμόζουν μεταξύ τους.

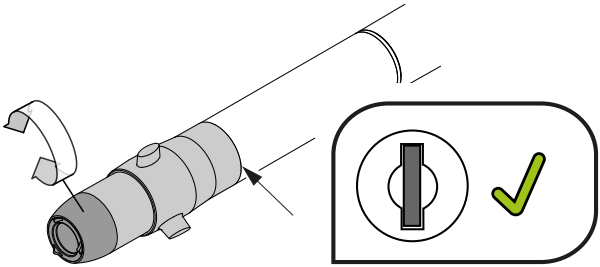

Χωρίς αντίσταση κατά την περιστροφή του συνδέσμου: Βιδώστε τον σύνδεσμο στο μοτέρ μέχρι να μην υπάρχει κενό μεταξύ των δύο μερών.

4. Βιδώστε το περίβλημα χειρολαβής ξανά στον εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης.

6.6 Αντικατάσταση μοτέρ χειρολαβής

Μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα λειτουργίας, η χειρολαβή μπορεί να κάνει πιο δυνατούς ή διαφορετικούς θορύβους από ό,τι στην αρχή της χρήσης της. Το πρόβλημα επιλύεται συνήθως με την αντικατάσταση του συνδέσμου για την ανταλλάξιμη κεφαλή σύσφιξης. Εάν η αντικατάσταση του συνδέσμου δεν επιφέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα, πρέπει να αντικατασταθεί το μοτέρ χειρολαβής.

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε την αντικατάσταση μόνοι σας:


1. Αφαιρέστε το μοτέρ χειρολαβής με τον σύνδεσμο, όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο „6.4 Reinigen des Flex-Saugschlauchs und des Motorkabels“ (σελίδα 58).

2. Συναρμολογήστε το νέο μοτέρ χειρολαβής στον σύνδεσμο για την ανταλλάξιμη κεφαλή σύσφιξης, όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο „6.5 Austauschen der Kupplung für den Wechselspannkopf“ (σελίδα 62).

3. Τοποθετήστε ξανά το νέο μοτέρ χειρολαβής με τον σύνδεσμο, όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο „6.4 Reinigen des Flex-Saugschlauchs und des Motorkabels“ (σελίδα 58).

6.7 Καθαρισμός του δακτυλίου έδρασης του συνδέσμου για την ανταλλάξιμη κεφαλή σύσφιξης

Για τον καθαρισμό του δακτυλίου έδρασης του συνδέσμου για την ανταλλάξιμη κεφαλή σύσφιξης, χρησιμοποιήστε τον στυλεό καθαρισμού και το υγρό καθαρισμού που παρέχονται.

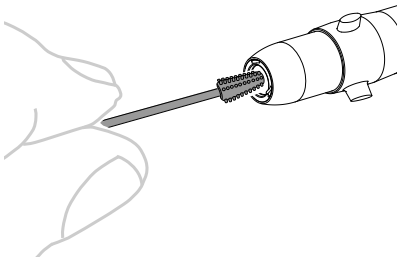

Αφαιρέστε την ανταλλάξιμη κεφαλή σύσφιξης όπως περιγράφεται στη σελίδα 57 για να έχετε πρόσβαση στον δακτύλιο έδρασης.

6.8 Εγγύηση

Για το προϊόν λαμβάνετε μια εγγύηση 2 ετών. Η κανονική φθορά των επιφανειών, των λαβών, των μηχανισμών σύσφιξης και/ή των κινούμενων εξαρτημάτων, όπως οι κύλινδροι, τα έδρανα, οι βυσματούμενες συνδέσεις, οι εύκαμπτοι σωλήνες αναρρόφησης κ.λπ. εξαιρούνται από την παρούσα εγγύηση. Τα σημάδια χρήσης, φθοράς και καταπόνησης που προκύπτουν από τη συνήθη χρήση που αντιστοιχεί στις τιμές επιδόσεων και τα χαρακτηριστικά του προϊόντος συνάδουν με τους όρους της σύμβασης και δεν συνιστούν ελαττώματα υπό τη νομική έννοια.

Η εγγύηση ισχύει από την ημερομηνία αγοράς, κατά την οποία ο πρώτος πελάτης απέκτησε το προϊόν. Η ημερομηνία αγοράς αποδεικνύεται με την απόδειξη αγοράς. Στο πλαίσιο της εγγύησης, η HELLMUT RUCK GmbH επισκευάζει δωρεάν ή αντικαθιστά κατά την κρίση της τα ελαττωματικά προϊόντα. Προϋπόθεση γι' αυτό αποτελεί η αποστολή του ελαττωματικού προϊόντος με έξοδα του πελάτη μαζί με την απόδειξη αγοράς. Για αξιώσεις από την εγγύηση στο εξωτερικό αρμόδιες είναι οι τοπικές αντιπροσωπείες. Σε περίπτωση αμφιβολίας, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τη RUCK πριν επιστρέψετε τα προϊόντα.

Η εγγύηση παύει να ισχύει, εφόσον διαπιστώσουμε ότι το ελάττωμα προκλήθηκε από ακατάλληλη ή εσφαλμένη εγκατάσταση, συναρμολόγηση ή χειρισμό, μη τήρηση των οδηγιών χρήσης, εξωτερική επίδραση ή ως αποτέλεσμα μη εξουσιοδοτημένης επισκευής ή τροποποίησης.

Η εγγύηση περιορίζεται στην επισκευή ή αντικατάσταση του προϊόντος. Δεν αναλαμβάνουμε καμία περαιτέρω ευθύνη (ιδίως για απώλειες κύκλου εργασιών ή κερδών). Εάν όμως διαπιστωθεί ότι πρόκειται για ένα ελάττωμα που δεν καλύπτεται από την εγγύηση ή ότι η προθεσμία παροχής εγγύησης έχει λήξει, τα έξοδα για τον έλεγχο και την επισκευή επιβαρύνουν τον πελάτη.


Με την επιφύλαξη τροποποιήσεων και αποκλίσεων όσον αφορά τον τεχνικό σχεδιασμό.

6.9 Φίλτρα και ανταλλακτικά


Προσφέρουμε κατάλληλα φίλτρα και ανταλλακτικά για τη διατήρηση ή την αποκατάσταση της λειτουργίας της συσκευής. Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά της RUCK. Η χρήση άλλων εξαρτημάτων μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργικότητα και τα χαρακτηριστικά της συσκευής. Μεταξύ άλλων, μπορεί να υπάρξει αυξημένη εκπομπή ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας ή μειωμένη ατρωσία σε παρεμβολές.

6.9.1 Φίλτρα

Σακούλα φίλτρου σκόνης, 4 τμχ, αρ. προϊόντος 5801001

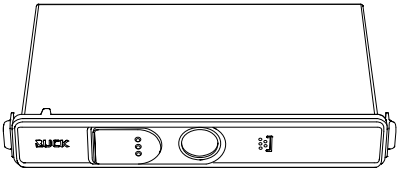


Φίλτρο HEPA, αρ. προϊόντος 5801101

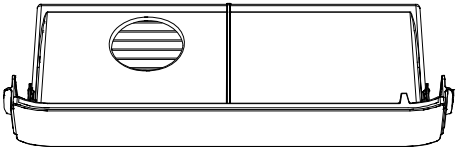


6.9.2 Ανταλλακτικά

Ανταλλάξιμη κεφαλή σύσφιξης nova PRO/SE, 3 τμχ, αρ. προϊόντος 5801701

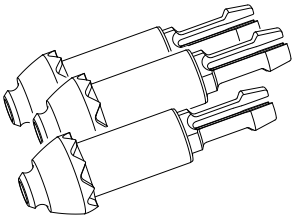

Βοήθημα αφαίρεσης, με όργανο μέτρησης φρέζας, για nova PRO/SE, αρ. προϊόντος 5802201

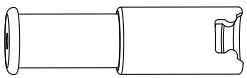


Στυλεός καθαρισμού για nova PRO/SE, αρ. προϊόντος 5801801




Βοήθημα συγκράτησης καλωδίου για nova PRO/SE, αρ. προϊόντος 5802401




Κάλυμμα σακούλας φίλτρου σκόνης, αρ. προϊόντος 4959902

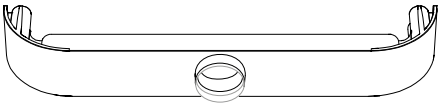


Σωληνωτό τεμάχιο σύνδεσης για θάλαμο φίλτρου σκόνης, αρ. προϊόντος 4977401

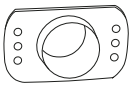


Κάλυμμα φίλτρου HEPA, αρ. προϊόντος 4959511

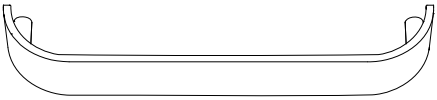


Μοτέρ χειρολαβής, με καλώδιο και βύσμα, αρ. προϊόντος 4960102

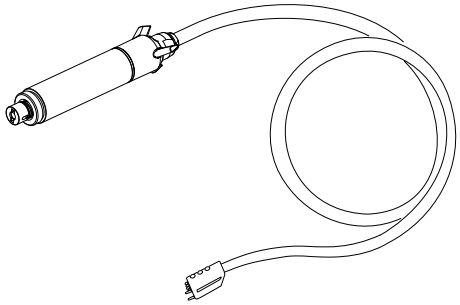

Συνολικό σετ μονάδας χειρολαβής, αρ. προϊόντος 4977511

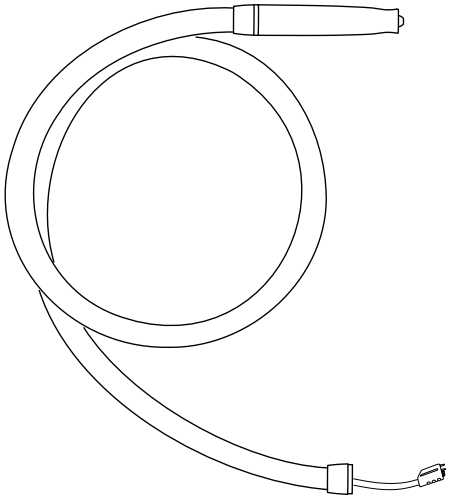


Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης Flex, 145 cm, αρ. προϊόντος 4959401

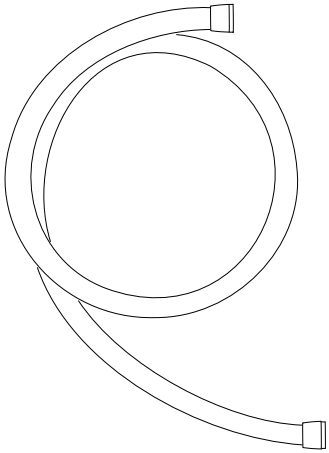


Συντήρηση και εγγύηση


Καλώδιο τροφοδοσίας, βύσμα τύπου C (Euro plug), αρ. προϊόντος 4959711

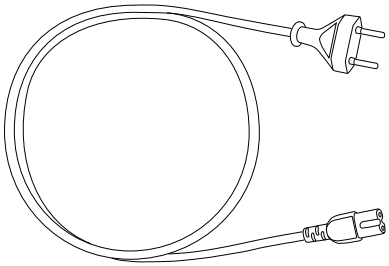


Καλώδιο τροφοδοσίας, βύσμα τύπου G, (για το Ηνωμένο Βασίλειο), αρ. προϊόντος 4959811

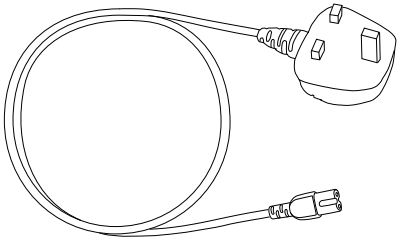

Περίβλημα χειρολαβής για nova SE, λευκό χρώμα, αρ. προϊόντος 4960502

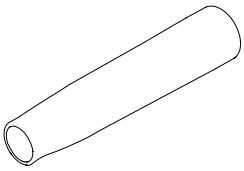


Σύνδεσμος για ανταλλακτική κεφαλή σύσφιξης, αρ. προϊόντος 4959301

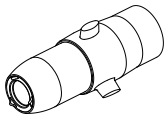


7 Παρελκόμενα


Βάση χειρολαβής για φορητό σύστημα για nova PRO/SE, αρ. προϊόντος 5802501

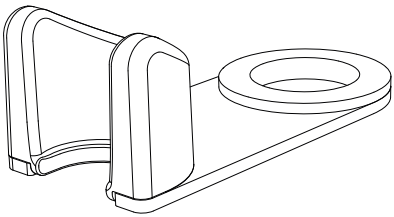


Βάση χειρολαβής για ROOM classic για nova PRO/SE, αρ. προϊόντος 5802502

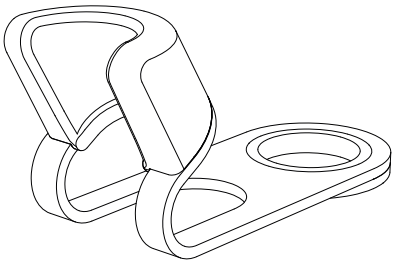

Βάση χειρολαβής για ROOM move για nova PRO/SE, αρ. προϊόντος 5802503

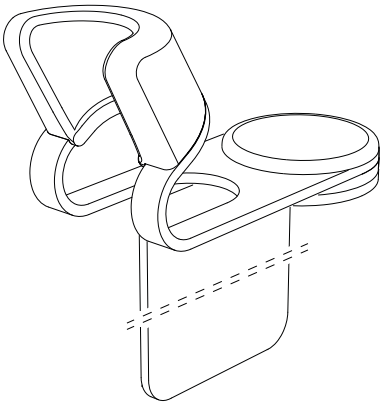


Βάση χειρολαβής για τοίχο ή εξωτερικό ερμάριο για nova PRO/SE, αρ. προϊόντος 5802504

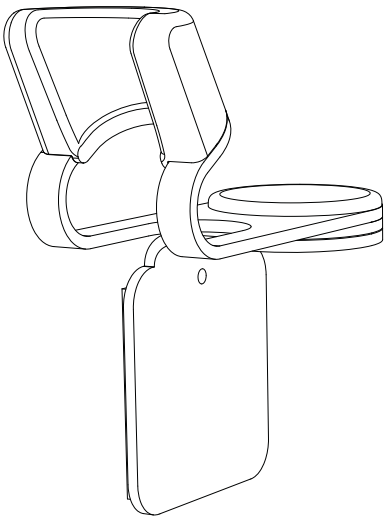


Παρελκόμενα


Ελεύθερη βάση χειρολαβής για nova PRO/SE, αρ. προϊόντος 5802505

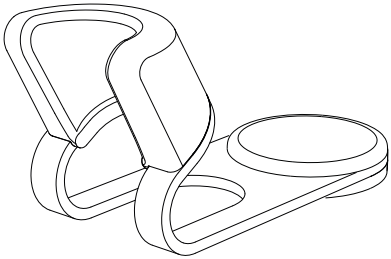


Σετ καθαρισμού εύκαμπτου σωλήνα για nova PRO/SE, αρ. προϊόντος 5801901

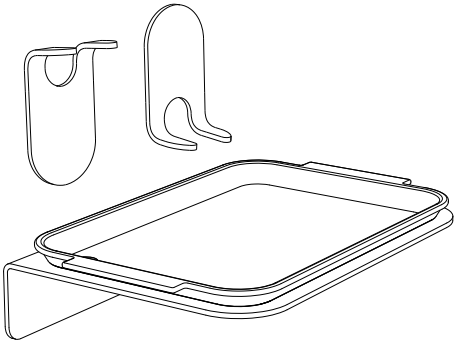

Στήριγμα για τον καθαρισμό του εύκαμπτου σωλήνα για nova PRO/SE, 2 τμχ, αρ. προϊόντος 5802301

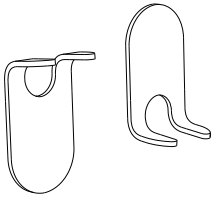

Πένσα φρέζας με επιχρωμιωμένη επίστρωση, αρ. προϊόντος 2126401

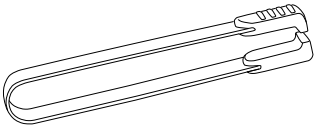

Κάντε κλικ στον σύνδεσμο ή σαρώστε τον κωδικό QR για να δείτε ένα βίντεο εφαρμογής.
qr.de/Fraeserzange

8 Απόρριψη

8.1 Εκτιμώμενη ωφέλιμη ζωή

Η εκτιμώμενη ωφέλιμη διάρκεια ζωής της συσκευής και των παρελκόμενων είναι 7 έτη.

8.2 Απόρριψη των φίλτρων

Απορρίψτε ολόκληρα τα φίλτρα μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.

8.3 Απόρριψη της συσκευής μετά την πάροδο της περιόδου χρήσης



Στην ΕΕ, οι παλιές συσκευές πρέπει να απορρίπτονται ως ηλεκτρονικά απόβλητα και όχι ως οικιακά απορρίμματα. Απορρίψτε τη συσκευή στο τέλος της διάρκειας ζωής της μέσω των κατάλληλων συστημάτων επιστροφής και συλλογής.

Με την υπεύθυνη απόρριψη προστατεύετε το περιβάλλον.

Τηρείτε τους κανονισμούς και τους νόμους που ισχύουν στην πολιτεία, τη χώρα και την περιοχή σας.

9 Μηνύματα

Η συσκευή σάς υποστηρίζει στον προγραμματισμό των αλλαγών φίλτρων και των εργασιών συντήρησης και σας παρέχει υποδείξεις για το πώς να επιλύετε μόνοι σας μικροπροβλήματα.

Επιπλέον, η συσκευή εμφανίζει μηνύματα. Ανάλογα με τον τύπο του μηνύματος, τα μηνύματα εμφανίζονται περιστασιακά ή μόνο κατά την επανεκκίνηση. Εάν υπάρχει τουλάχιστον 1 μήνυμα σε εκκρεμότητα, το σύμβολο του μηνύματος εμφανίζει έναν μικρό κόκκινο κύκλο. Ο αριθμός εντός του κύκλου υποδηλώνει τον αριθμό των μηνυμάτων που εκκρεμούν.



Όσο εμφανίζονται μηνύματα στην οθόνη, το μοτέρ χειρολαβής είναι απενεργοποιημένο. Η αυτόματη απενεργοποίηση του μοτέρ γίνεται για την ασφάλειά σας.

Ορισμένα μηνύματα φέρουν κουμπιά για αλληλεπίδραση.

Τα σύμβολα σε αυτά τα κουμπιά έχουν την ακόλουθη σημασία:


Επιβεβαίωση / Συνέχεια


Μη επιβεβαίωση / Απόρριψη


Επαναφορά μετρητή

9.1 Επισκόπηση μηνυμάτων

Το κάλυμμα της σακούλας φίλτρου σκόνης είναι ανοιχτό.	Αριθμός μηνύματος
Το μήνυμα εμφανίζεται εάν το κάλυμμα της σακούλας φίλτρου σκόνης έχει ανοίξει σκόπιμα ή κατά λάθος. Το άνοιγμα είναι απαραίτητο, π.χ. όταν πρέπει να αντικατασταθεί η σακούλα φίλτρου σκόνης ή να καθαριστεί ο εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης. Κλείστε το κάλυμμα μόλις ολοκληρώσετε τις εργασίες. Μπορείτε να συνεχίσετε να εργάζεστε με τη συσκευή μόνο αφού κλείσει το κάλυμμα.	22004

Δεν υπάρχει σακούλα φίλτρου σκόνης στη συσκευή.	Αριθμός μηνύματος
Το μήνυμα εμφανίζεται εάν δεν υπάρχει σακούλα φίλτρου σκόνης στη συσκευή. Τοποθετήστε μια νέα σακούλα φίλτρου σκόνης, βλ. σελίδα 45. Μπορείτε να συνεχίσετε να εργάζεστε με τη συσκευή μόνο εφόσον υπάρχει τοποθετημένη σακούλα φίλτρου σκόνης.	22002

Δεν υπάρχει φίλτρο HEPA στη συσκευή.	Αριθμός μηνύματος
Το μήνυμα εμφανίζεται εάν δεν υπάρχει φίλτρο HEPA στη συσκευή. Τοποθετήστε ένα νέο φίλτρο HEPA, βλ. σελίδα 48. Μπορείτε να συνεχίσετε να εργάζεστε με τη συσκευή μόνο εφόσον υπάρχει τοποθετημένο φίλτρο HEPA.	22003

Απαιτείται καθαρισμός του εύκαμπτου σωλήνα.	Αριθμός μηνύματος
Το μήνυμα εμφανίζεται ως υπενθύμιση για να καθαρίσετε το εσωτερικό του εύκαμπτου σωλήνα αναρρόφησης Flex. Μπορείτε να ρυθμίσετε τον χρονοδιακόπτη σε μια τιμή μεταξύ 5 και 35 ωρών λειτουργίας. Μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε εντελώς την υπενθύμιση, βλ. σελίδα 39. Αγγίξτε το τικ για να κλείσετε το μήνυμα. Αποσυναρμολογήστε και καθαρίστε τον εύκαμπτο σωλήνα. Περιγραφή της αφαίρεσης του σωλήνα αναρρόφησης: Σελίδα 58.	40005

Μηνύματα

Βαθμός πλήρωσης σακούλας φίλτρου σκόνης: 60%.	Αριθμός μηνύματος
Το μήνυμα εμφανίζεται εάν ο βαθμός πλήρωσης της σακούλας φίλτρου σκόνης είναι μεταξύ 60% και 79% και συντρέχει μία από τις ακόλουθες συνθήκες: › **Η λειτουργία αναμονής τερματίστηκε μετά από 10 ώρες ή περισσότερο.** › **Η συσκευή ενεργοποιήθηκε ξανά.** Το μήνυμα είναι αμιγώς πληροφοριακό. Μπορείτε να συνεχίσετε να εργάζεστε χωρίς περιορισμούς. Η επόμενη υπόδειξη εμφανίζεται όταν η σακούλα φίλτρου σκόνης έχει γεμίσει κατά 80%.	40000

Βαθμός πλήρωσης σακούλας φίλτρου σκόνης: 80%.	Αριθμός μηνύματος
Το μήνυμα εμφανίζεται εάν ο βαθμός πλήρωσης της σακούλας φίλτρου σκόνης είναι μεταξύ 80% και 99% και συντρέχει μία από τις ακόλουθες συνθήκες: › **Η λειτουργία αναμονής τερματίστηκε μετά από 10 ώρες ή περισσότερο.** › **Η συσκευή ενεργοποιήθηκε ξανά.** Η ισχύς αναρρόφησης της συσκευής μειώνεται και ελαττώνεται περαιτέρω με την αύξηση του βαθμού πλήρωσης. Αντικαταστήστε τη σακούλα φίλτρου σκόνης το συντομότερο δυνατό.	50000

Η σακούλα φίλτρου σκόνης είναι γεμάτη.	Αριθμός μηνύματος
Το μήνυμα εμφανίζεται όταν η σακούλα φίλτρου σκόνης είναι γεμάτη. Αφαιρέστε τη σακούλα φίλτρου σκόνης και τοποθετήστε μια νέα, βλ. σελίδα 45.	50001

Αντικατάσταση φίλτρου: Σακούλα φίλτρου σκόνης.	Αριθμός μηνύματος
Το μήνυμα εμφανίζεται εάν το κάλυμμα της σακούλας φίλτρου σκόνης έχει κλείσει και πάλι μετά το άνοιγμά του. Αγγίξτε το τικ για να επιβεβαιώσετε την αλλαγή φίλτρου. Αγγίξτε τον λευκό σταυρό αν δεν έχετε αντικαταστήσει το φίλτρο.	50005

Φίλτρο HEPA: Υπόδειξη αντικατάστασης 1	Αριθμός μηνύματος
Το μήνυμα εμφανίζεται εάν έχουν παρέλθει 370 έως 389 ώρες λειτουργίας από την τελευταία αντικατάσταση του φίλτρου HEPA και συντρέχει μία από τις ακόλουθες συνθήκες: › **Η λειτουργία αναμονής τερματίστηκε μετά από 10 ώρες ή περισσότερο.** › **Η συσκευή ενεργοποιήθηκε ξανά.** Το μήνυμα είναι αμιγώς πληροφοριακό. Μπορείτε να συνεχίσετε να εργάζεστε χωρίς περιορισμούς. Το επόμενο μήνυμα εμφανίζεται μετά από 390 ώρες λειτουργίας του φίλτρου HEPA. Το φίλτρο HEPA πρέπει να αντικαθίσταται το αργότερο μόλις συμπληρώσει 400 ώρες λειτουργίας.	40002

Φίλτρο HEPA: Υπόδειξη αντικατάστασης 2	Αριθμός μηνύματος
Το μήνυμα εμφανίζεται εάν έχουν παρέλθει 390 έως 399 ώρες λειτουργίας από την τελευταία αντικατάσταση του φίλτρου HEPA και συντρέχει μία από τις ακόλουθες συνθήκες: › **Η λειτουργία αναμονής τερματίστηκε μετά από 10 ώρες ή περισσότερο.** › **Η συσκευή ενεργοποιήθηκε ξανά.** Το φίλτρο HEPA είναι σχεδόν γεμάτο. Η ισχύς αναρρόφησης της συσκευής μειώνεται και ελαττώνεται περαιτέρω με την αύξηση των ωρών λειτουργίας. Αντικαταστήστε το φίλτρο HEPA το συντομότερο δυνατό. Το φίλτρο HEPA πρέπει να αντικαθίσταται το αργότερο μόλις συμπληρώσει 400 ώρες λειτουργίας.	50003

Το φίλτρο HEPA είναι γεμάτο.	Αριθμός μηνύματος
Το μήνυμα εμφανίζεται όταν το φίλτρο HEPA είναι γεμάτο. Το φίλτρο HEPA έχει συμπληρώσει 400 ώρες λειτουργίας. Αφαιρέστε το φίλτρο HEPA και τοποθετήστε ένα νέο φίλτρο HEPA, βλ. σελίδα 48	50004

Αντικατάσταση φίλτρου: Φίλτρο HEPA.	Αριθμός μηνύματος
Το μήνυμα εμφανίζεται εάν τοποθετηθεί πάλι ένα φίλτρο HEPA στον άξονα μετά την αφαίρεση του φίλτρου HEPA. Αγγίξτε το τικ για να επιβεβαιώσετε την αλλαγή φίλτρου. Αγγίξτε τον λευκό σταυρό αν δεν έχετε αντικαταστήσει το φίλτρο.	50006

Μηνύματα

Η επόμενη συντήρηση θα πραγματοποιηθεί σύντομα.	Αριθμός μηνύματος
Το μήνυμα εμφανίζεται εάν η συντήρηση πρέπει να πραγματοποιηθεί σε 40 ώρες λειτουργίας ή λιγότερο. Η τακτική συντήρηση πρέπει να πραγματοποιείται μετά από 1200 ώρες λειτουργίας. Το μήνυμα είναι αμιγώς πληροφοριακό. Μπορείτε να συνεχίσετε να εργάζεστε χωρίς περιορισμούς.	40001

Η συντήρηση έχει καθυστερήσει.	Αριθμός μηνύματος
Το μήνυμα εμφανίζεται εάν έχουν παρέλθει τουλάχιστον 1200 ώρες λειτουργίας από την τελευταία συντήρηση και υπάρχει μία από τις ακόλουθες συνθήκες: › **Η λειτουργία αναμονής τερματίστηκε μετά από 10 ώρες ή περισσότερο.** › **Η συσκευή ενεργοποιήθηκε ξανά.** Το μήνυμα είναι αμιγώς πληροφοριακό. Μπορείτε να συνεχίσετε να εργάζεστε χωρίς περιορισμούς. Όταν πραγματοποιηθεί συντήρηση από το τμήμα τεχνικής εξυπηρέτησης της RUCK, οι ώρες λειτουργίας μηδενίζονται και το μήνυμα διαγράφεται.	50002

Καθαρισμός: Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης Flex	Αριθμός μηνύματος
Το μήνυμα εμφανίζεται εάν, μετά το άνοιγμα του καλύμματος της σακούλας φίλτρου σκόνης, το κάλυμμα κλείσει ξανά και ο χρόνος για την υπενθύμιση καθαρισμού του εύκαμπτου σωλήνα έχει παρέλθει. Αγγίξτε το τικ για να επιβεβαιώσετε τον καθαρισμό του εύκαμπτου σωλήνα αναρρόφησης. Με αυτόν τον τρόπο ο χρονοδιακόπτης για την υπενθύμιση επανέρχεται στην αρχική τιμή. Αγγίξτε τον λευκό σταυρό αν δεν έχετε καθαρίσει τον εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης. Η λειτουργία υπενθύμισης μπορεί να ρυθμιστεί μεταξύ 5 και 35 ωρών λειτουργίας ή να απενεργοποιηθεί εντελώς, βλ. σελίδα 39.	40050

Υπερφόρτωση του μοτέρ χειρολαβής	Αριθμός μηνύματος
Το μήνυμα εμφανίζεται εάν υπάρχει ξένο σώμα στη χειρολαβή που υπερφορτώνει το μοτέρ της χειρολαβής. Αυτό θα μπορούσε π.χ. να είναι ένα γάντι μίας χρήσης ή ένα κομμάτι του. Ξεβιδώστε το περίβλημα της χειρολαβής και αφαιρέστε το ξένο σώμα που παρεμποδίζει τη λειτουργία της συσκευής. Μόλις αποκατασταθεί το πρόβλημα και επιβεβαιωθεί το μήνυμα, μπορείτε να συνεχίσετε να εργάζεστε με τη συσκευή.	22304

Αύξηση θερμοκρασίας του στροβίλου αναρρόφησης	Αριθμός μηνύματος
Το μήνυμα εμφανίζεται εάν ο στρόβιλος αναρρόφησης έχει υψηλότερη θερμοκρασία από την προβλεπόμενη. Βεβαιωθείτε ότι δεν καλύπτεται η έξοδος αέρα στο πίσω μέρος της συσκευής. Αντικαταστήστε τη σακούλα φίλτρου σκόνης όταν ο βαθμός πλήρωσης είναι 80% ή περισσότερο.	22402

Ο στρόβιλος αναρρόφησης έχει υπερθερμανθεί: ## °C	Αριθμός μηνύματος
Το μήνυμα εμφανίζεται εάν ο στρόβιλος αναρρόφησης έχει θερμανθεί υπερβολικά. Περιμένετε μέχρι ο στρόβιλος αναρρόφησης να κρυώσει και να φτάσει στους 52°C. Εάν το σφάλμα εμφανιστεί ξανά: Επικοινωνήστε με το τμήμα τεχνικής εξυπηρέτησης της RUCK.	32404

Η πλακέτα κυκλώματος έχει υπερθερμανθεί.	Αριθμός μηνύματος
Το μήνυμα εμφανίζεται όταν μια πλακέτα κυκλώματος έχει θερμανθεί υπερβολικά. Επικοινωνήστε με το τμήμα τεχνικής εξυπηρέτησης της RUCK.	32353 32456

Σφάλμα συσκευής.	Αριθμός μηνύματος
Το μήνυμα εμφανίζεται εάν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα που μπορεί να αποκατασταθεί μόνο από το τμήμα τεχνικής εξυπηρέτησης της RUCK. Επικοινωνήστε με το τμήμα τεχνικής εξυπηρέτησης της RUCK.	32350 32351 32352

10 Τεχνικά στοιχεία

Χαρακτηριστικό	Τιμή και μονάδα
Διαστάσεις της κύριας μονάδας με μονάδα οθόνης (πλάτος x βάθος x ύψος)	251 x 269 x 122 mm
Μήκος χειρολαβής	132 mm
Διάμετρος χειρολαβής	26 mm
Διάμετρος στελέχους κατάλληλων εργαλείων	2,35 mm (2,334 mm έως 2,350 mm)
Βάρος κύριας μονάδας	2520 g
Βάρος χειρολαβής	103 g
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα αναρρόφησης	145 cm
Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας	100 cm
Τάση τροφοδοσίας της συσκευής	100 - 240 V AC | 50 - 60 Hz | 0,9 – 1,6 A
Μέγιστη κατανάλωση ισχύος	155 W
Τάση τροφοδοσίας του μοτέρ χειρολαβής	24V
Ταχύτητα περιστροφής χωρίς φορτίο	30.000 1/min
Μέγιστη ισχύς αναρρόφησης	250 l/min
Βαθμός προστασίας	IP 21
Στάθμη θορύβου	< 70 dB(A)

Σημειώσεις

HELLMUT RUCK GmbH
Daimlerstraße 23
DE–75305 Neuenbürg
fon +49 (0)7082 944 20
fax +49 (0)7082 944 22 22
kontakt@hellmut-ruck.de
hellmut-ruck.de